



Rea® Dahlia® elettrica

it Carrozzina manuale
Manuale per la manutenzione

1 Generale

1.1 Introduzione

Il presente manuale si riferisce a un accessorio Invacare e contiene informazioni importanti relative alla manipolazione e al montaggio. Per garantire la sicurezza di utilizzo del prodotto, leggere attentamente il Manuale d'uso del prodotto e seguire le istruzioni per la sicurezza.

Il manuale d'uso è disponibile sul sito Web di Invacare, oppure è possibile rivolgersi al rappresentante Invacare (vedere gli indirizzi alla fine del presente manuale).

Il presente manuale contiene simboli che indicano gli eventuali pericoli. Tali simboli sono accompagnati da un avvertimento che indica la gravità del rischio.

2 Sicurezza

2.1 Informazioni generali



IMPORTANTE!

- Per ulteriori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche elettriche, consultare il manuale d'uso.
- Se la carrozzina viene consegnata prima del 15 dicembre 2015, assicurarsi che all'utilizzatore venga fornita la versione più recente del manuale d'uso. La versione più recente del manuale d'uso può anche essere scaricata dai siti Web locali www.invacare.xx (xx = codice lingua).

Lingua	N. art. UM	Lingua	N. art. UM
Danese	1575584	Tedesco	1575628


Spagnolo	1575629	Italiano	1575630
Inglese	1572307	Giapponese	1587499
Olandese	1576732	Portoghese	1575631
Finlandese	1580783	Svedese	1575581
Francese	1575583		

3 Messa in servizio

3.1 Montaggio della batteria



Quando si cambia la batteria, il cavo della pulsantiera deve essere collegato per almeno 10 secondi per poter indicare il livello di carica della nuova batteria.

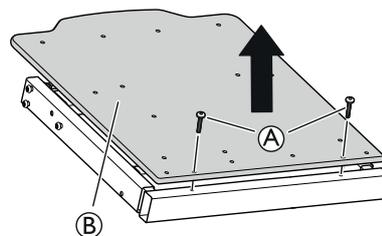


1. Allentare e rimuovere le viti (A) e la piastra del sedile (B).



RIVENDITORE: Conservare questo manuale.
Le procedure indicate nel presente manuale DEVONO essere eseguite da tecnici qualificati.




Yes, you can.®

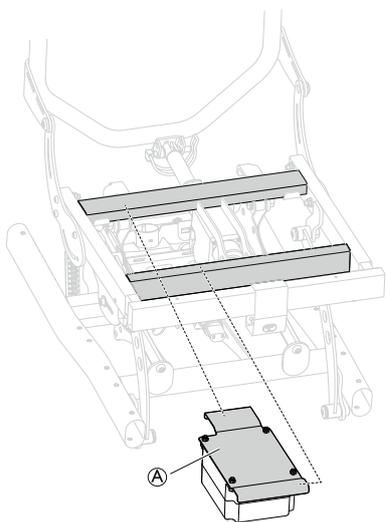

1. Montare l'attacco insieme alla batteria (A) sul telaio.

Montaggio del supporto per la prolunga del cavo di alimentazione

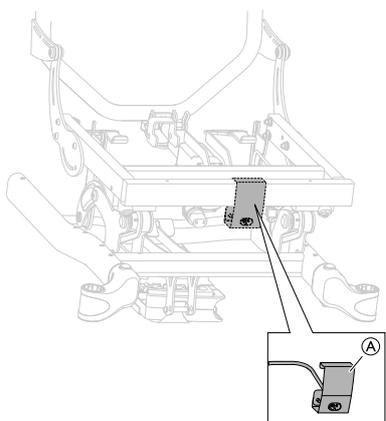


1. Posizionare il supporto (A) nell'area contrassegnata sul telaio.
2. Collegare la prolunga del cavo di alimentazione alla centralina.
 - Per ulteriori informazioni su come collegare i cavi, vedere la sezione "Schema elettrico".



ATTENZIONE!

Danneggiamento del cavo della batteria

- Assicurarsi di fissare i cavi in modo tale che non vengano schiacciati o tirati.
- Controllare che i cavi scorrano liberamente quando si utilizza la funzione di inclinazione e/o reclinazione.

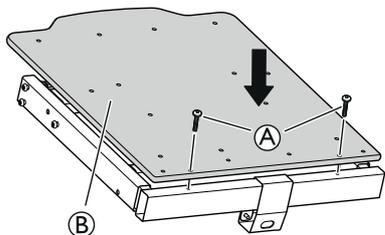

3. Rimontare la piastra del sedile (B).
4. Serrare le viti (A).

3.1.1 Ricarica della batteria



Danni alla batteria

- La prima volta, la batteria deve essere lasciata in carica per 24 ore prima di utilizzare il sistema.
- Dopo il caricamento, scollegare il cavo di alimentazione prima di usare la carrozzina.



Il caricabatteria è dotato di diversi cavi di ricarica per l'adattamento ai diversi standard elettrici locali.



Se si utilizza la carrozzina con batteria quasi scarica (20%), il sistema emette un segnale acustico.

3.2 Montaggio degli attuatori



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni


- La carrozzina può ripiegarsi su se stessa
- Verificare che le rondelle di bloccaggio siano fissate saldamente.
 - Se si utilizza il perno di sicurezza, verificare che il fermo / occhiello di bloccaggio sia fissato saldamente.



ATTENZIONE!

Rischio per la sicurezza

- La carrozzina può ripiegarsi su se stessa
- Ricordarsi sempre di reinserire e fissare il perno di sicurezza quando è stato rimosso.
 - Verificare che il fermo/occhiello di bloccaggio sia fissato saldamente.

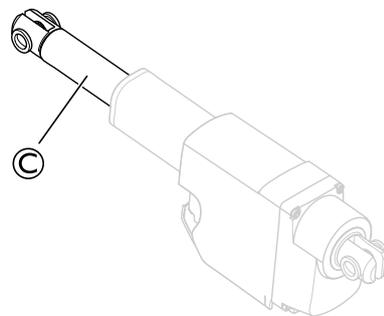


ATTENZIONE!

Versione elettrica

- Lo schienale può giungere staccato se l'asta del pistone si è accidentalmente staccata dal suo alloggiamento.
- Prima di attaccare il pistone allo schienale, ruotare al massimo l'asta del pistone (C) in senso orario.
 - Quando si allineano i fori, ruotare l'asta del pistone (C) al massimo solo di un mezzo giro in senso antiorario.


3.2.1 Montaggio dell'attuatore dello schienale

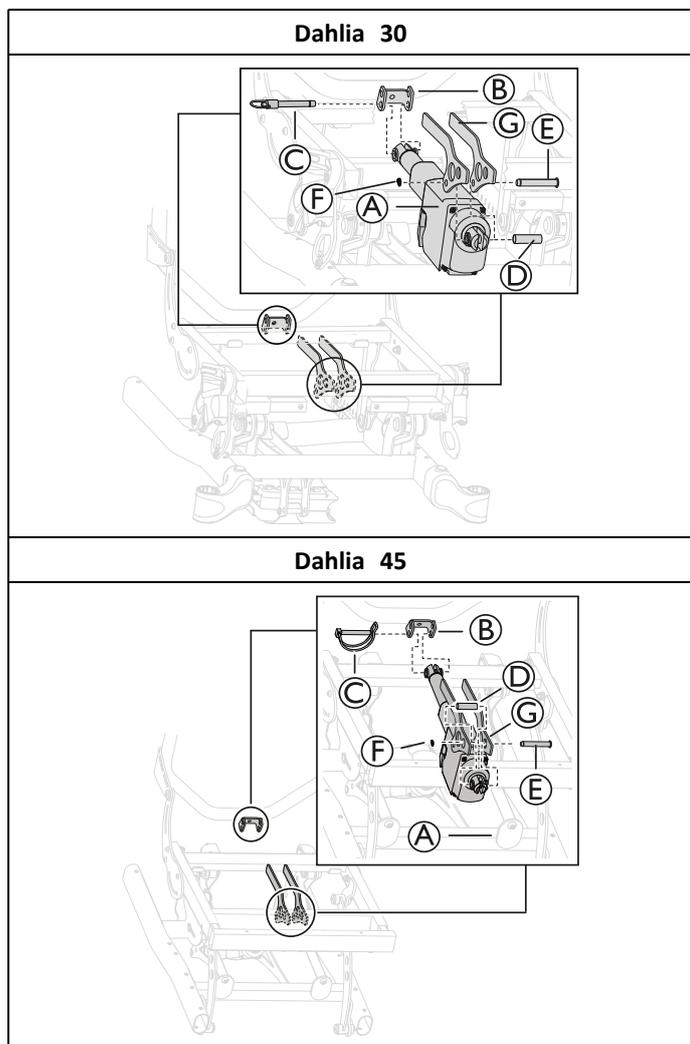

1. Inserire la parte superiore dell'attuatore dello schienale (A) nell'attacco (B) sul telaio.
2. Fissare l'attuatore dello schienale con il perno di sicurezza o il fermo di sicurezza (C) nel foro inferiore dell'attacco.
 Il modello Dahlia 30 ha un perno di sicurezza, mentre il modello Dahlia 45 ha un fermo di sicurezza.
3. Inserire la parte inferiore dell'attuatore dello schienale (A) nell'attacco inferiore (G) sul telaio.
4. Fissare la parte inferiore con il perno (E), il manicotto (D) e la rondella di bloccaggio (F).


 Pinze

Bloccaggio del perno di sicurezza

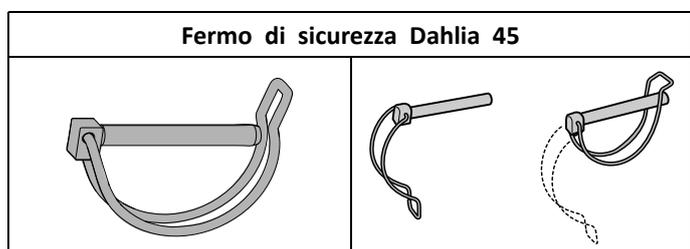

3.2.2 Montaggio dell'attuatore di inclinazione del sedile


Attuatore di inclinazione del sedile — Dahlia 30

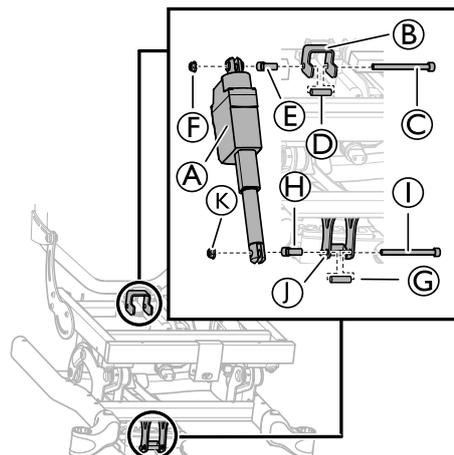

1. Inserire la parte superiore dell'attuatore di inclinazione del sedile (A) nell'attacco (B) sul telaio.
2. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con la vite (C), i manicotti (D) ed (E) e il dado (F).
3. Inserire la parte inferiore dell'attuatore di inclinazione del sedile nell'attacco anteriore (J) sul telaio.
4. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con la vite (I), i manicotti (G) e (H) e il dado (K).
5. Serrare le viti a una coppia di 24 Nm.

 Chiave a brugola da 6 mm / chiave fissa da 13 mm

Attuatore di inclinazione del sedile — Dahlia 45

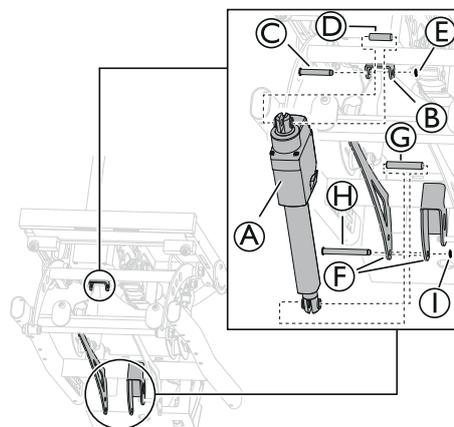


1. Inserire la parte superiore dell'attuatore di inclinazione del sedile (A) nell'attacco (B) sul telaio.
2. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con il perno (C), il manicotto (D) e la rondella di bloccaggio (E).
3. Inserire la parte inferiore dell'attuatore di inclinazione del sedile nell'attacco inferiore (F) sul telaio.
4. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con il perno (H), il manicotto (G) e la rondella di bloccaggio (I).

 Pinze

3.3 Montaggio della centralina

Dahlia 30

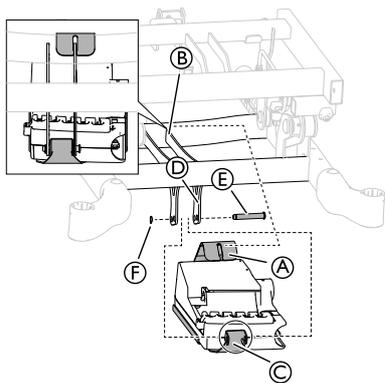


1. Montare la parte superiore del supporto della centralina (A) nell'attacco (B) sul telaio.
2. Montare la parte inferiore del supporto della centralina (C) nell'attacco (D) sul telaio.
3. Fissare il supporto della centralina (C) con il perno (E) e la rondella di bloccaggio (F).

 Pinze

Dahlia 45


1.

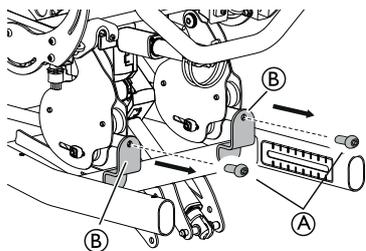

Allentare e rimuovere le viti (A) dalle piastre di fissaggio (B).

 Chiave a brugola da 5 mm

2.

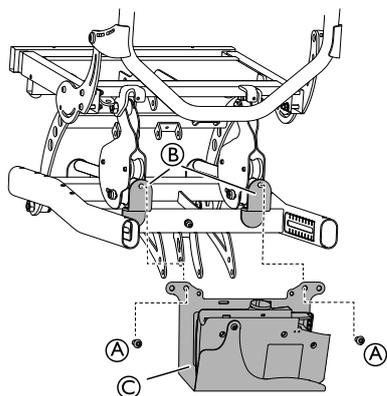


Montare il supporto della centralina (C) sulle piastre di fissaggio (B).

3. Reinserrire le viti (A) per fissare il supporto della centralina.
4. Serrare le viti a una coppia di 24 Nm.

 Chiave a brugola da 5 mm

3.4 Blocco del cavo — attuatore

Rimozione del blocco del cavo

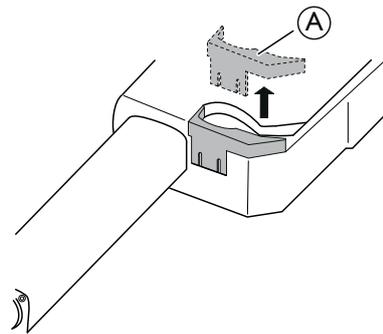

1. Allentare il blocco del cavo (A).
 Servirsi di un cacciavite per allentare il blocco del cavo.
2. Rimuovere il blocco del cavo dall'attuatore.




AVVERTENZA!

Danni al prodotto

– Quando si rimuove un blocco del cavo, questo deve essere sostituito con uno nuovo.

Montaggio del blocco del cavo

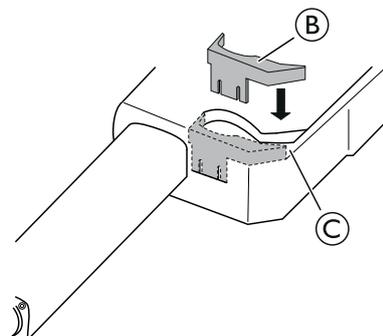

1. Inserire il cavo nel supporto (C) sull'attuatore di inclinazione del sedile.
 Il cavo deve essere premuto a fondo nel supporto prima di aggiungere il blocco del cavo (B).
2. Fissare il blocco del cavo (B) premendolo in posizione sull'attuatore di inclinazione del sedile.




AVVERTENZA!

Rischio di danni al prodotto

– Il blocco del cavo deve essere montato quando si lava la carrozzina.

3.5 Schema elettrico

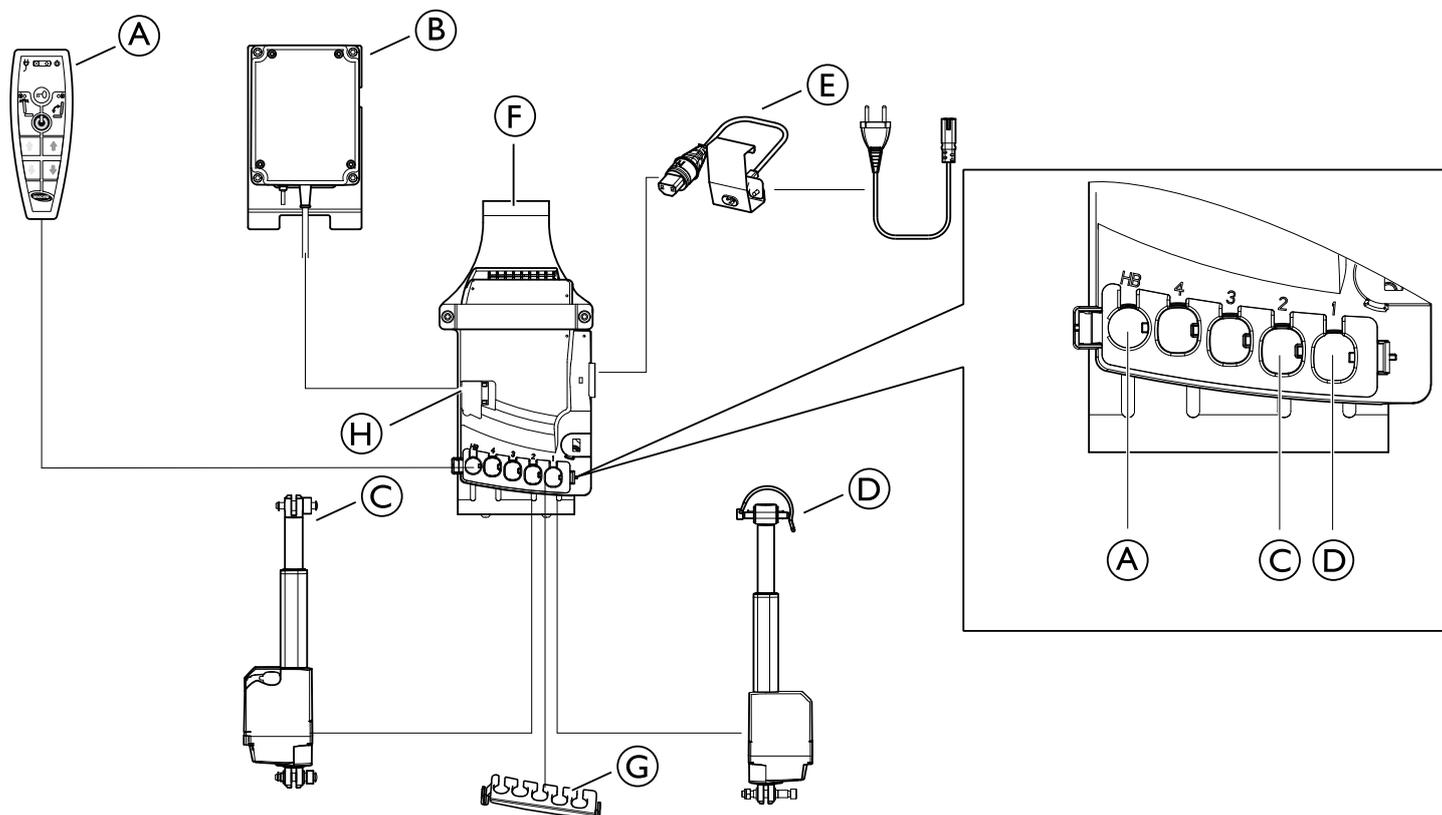

(A)	Pulsantiera
(B)	Batteria
(C)	Attuatore di inclinazione del sedile
(D)	Attuatore di reclinazione dello schienale
(E)	Cavo di alimentazione
(F)	Centralina
(G)	Blocco dei cavi degli attuatori
(H)	Blocco del cavo della batteria



AVVERTENZA!

Rischio di malfunzionamento

Il sistema può non funzionare correttamente

- Collegare tutte le funzioni prima di collegare il cavo di alimentazione.
- Per prima cosa, collegare la pulsantiera. Il collegamento alla centralina è contrassegnato con "HB".
- Collegare i diversi attuatori in base allo schema sopra indicato.
- Verificare che tutti i connettori siano collegati correttamente e premuti saldamente nella presa di collegamento.
- Controllare che i blocchi dei cavi siano innestati per fissare i cavi alla centralina.
- Collegare la batteria.
- Collegare il cavo di alimentazione e accendere la carrozzina.
- Le centraline devono essere collegate esclusivamente alla tensione di alimentazione specificata sull'etichetta. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Sistema elettrico".
- Quando si usa il sistema, assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, tesi o esposti ad oggetti taglienti.

Rivenditori:

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59,
Fax: (39) 0445 38 00 34,
italia@invacare.com
www.invacare.it



Fabbricante:

Invacare Rea AB
Växjövägen 303
S-343 75 Diö

1587574-A 2017-01-01



Making Life's Experiences Possible®

rea®



Yes, you can.®