


# Invacare® Gloss®



sv Rollator  
Servicemanual

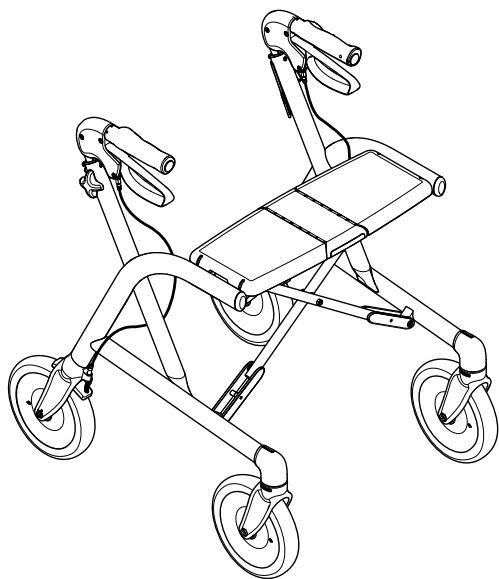

ÅTERFÖRSÄLJARE: Behåll den här manualen.  
Procedurerna i den här manualen får ENDAST utföras av en kvalificerad tekniker.

**Dolomite**



**Yes, you can.®**

©2020 Invacare Corporation

Med ensamrätt. Innehållet får inte ges ut på nytt, mångfaldigas eller förändras helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Invacare. Varumärken betecknas med ™ och ®. Samtliga varumärken tillhör eller är licensierade till Invacare Corporation eller dess dotterbolag om ingenting annat anges.

---

## Innehållsförteckning

---

<b>1 Allmänt</b> . . . . .	<b>4</b>
1.1 Inledning . . . . .	4
1.2 Produktlivslängd . . . . .	4
1.3 Garanti . . . . .	4
1.4 Kassering . . . . .	4
<b>2 Service</b> . . . . .	<b>5</b>
2.1 Underhåll . . . . .	5
2.2 Serviceintervall . . . . .	5
2.3 Inspektionschecklista . . . . .	6
2.4 Rengöring . . . . .	7
<b>3 Teknisk Data</b> . . . . .	<b>8</b>
3.1 Mått och vikt . . . . .	8
3.2 Material . . . . .	8

---

# 1 Allmänt

---

## 1.1 Inledning

Den här manualen innehåller viktig information om montering, justering och avancerat underhåll av produkten. Läs igenom den noga och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att du hanterar produkten på ett säkert sätt.

Bruksanvisningen finns på hemsidan för Invacare. Du kan också kontakta ett ombud för Invacare. Adresser finns i slutet av den här manualen.

Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av den här manualen innan du läser den. Du hittar den senaste versionen som PDF-fil på webbplatsen för Invacare.

Säljinformation och användarinformation finns i bruksanvisningen.

Kontakta en Invacare-representant om du vill ha mer information om produkten, till exempel produktsäkerhetsmeddelanden och produktåterkallelser. Adresser finns i slutet av det här dokumentet.

## 1.2 Produktlivslängd

Produktens förväntade livslängd är fem år om den används i enlighet med säkerhetsinstruktionerna, underhållsintervallen och anvisningarna för korrekt användning som finns i den här bruksanvisningen. Produktens faktiska livslängd kan variera beroende på hur mycket och hur intensivt den används.

## 1.3 Garanti

Vi ger två års garanti från leveransdatumet. Avvikelse kan förekomma på grund av lokala bestämmelser. Skador som beror på normalt slitage på exempelvis hjul, handtag och bromsar samt skador som beror på onormal användning (t.ex. om brukarens maxvikt överskrider) täcks inte av garantin. Instruktionerna för underhåll och användning måste följas för att garantin ska gälla.

## 1.4 Kassering

Tänk på miljön och återvinn produkten genom att lämna in den på en återvinningscentral när den inte längre kan användas.

Ta isär produkten och dess komponenter så att de olika materialen kan separeras och återvinnas individuellt.

Kassering och återvinning av begagnade produkter och förpackningar måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för avfallshantering i respektive land. Kontakta det företag som sköter den lokala avfallshanteringen för att få information.

---

## 2 Service

---

### 2.1 Underhåll

- Kontrollera att hjulen och gafflarna fungerar som de ska, att de är fria från defekter och att de sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att inget hår, ludd eller annat skräp har fastnat i hjulen.
- Kontrollera att skruvar och justeringar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att bromsarna fungerar.
- Kontrollera att fällmekanismen fungerar som den ska och att den är fri från defekter
- Kontrollera att handgreppen och handtagsröret sitter fast ordentligt och att de är fria från defekter.
- Kontrollera att ramen är fri från defekter.
- Kontrollera att sätet och ryggstödet sitter fast ordentligt och att de är fria från defekter.

För mer information se checklisten på nästa sida.

### 2.2 Serviceintervall

Produkten måste kontrolleras och underhållas regelbundet. Serviceintervallet beror på hur ofta produkten används och hur stor belastning som gånghjälpmedlet utsätts för.



Produkten måste alltid kontrolleras och underhållas innan den överlämnas till en annan brukare.

## 2.3 Inspektionschecklista

Kontrollpunkter	Möjligt problem	Åtgärd	Anmärkningar	OK
Kontrollera att hjulen och gafflarna fungerar som de ska, att de är fria från defekter och att de sitter fast ordentligt.	Hjulet roterar trögt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut hjulet och låsmuttern.</li> </ul>		
	Däckmönstret är trasigt eller skadat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut hjulet.</li> <li>• Dra åt bultarna.</li> <li>• Byt ut låsmuttern.</li> </ul>	Använd permanent låslim om låsmuttern saknas.	
	Hjulbultarna är lösa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra åt bultarna.</li> <li>• Byt ut låsmuttern.</li> </ul>	Använd permanent låslim om låsmuttern saknas.	
	Hjulen är inte jämnt justerade i höjd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justera bakhjulsgaffeln.</li> <li>• Dra åt skruvarna.</li> </ul>		
	Skruvarna på bakgaffeln är lösa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra åt skruvarna.</li> </ul>		
	Framgaffeln sitter inte fast i ramen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra åt framgaffeln med 60 Nm.</li> </ul>		
	Framgaffeln är skadad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut gaffeln.</li> <li>• Dra åt framgaffeln med 60 Nm.</li> </ul>		
	Bakgaffeln är skadad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut gaffeln.</li> </ul>		
	Framgaffeln roterar inte jämnt och ljudlöst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut gaffeln.</li> <li>• Dra åt framgaffeln med 60 Nm.</li> </ul>		
Kontrollera att bromssystemet fungerar som det ska och är fritt från defekter	Bromsskon är utsliten eller deformerad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut bromsskon.</li> </ul>		
	Bromsskon går inte tillbaka till ursprungsläget efter bromsning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut bromsskon eller vajern och höljet.</li> </ul>		
	Bromsvajern rör sig trögt i vajerhöljet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut bromsvajern och höljet.</li> </ul>		
	Dålig bromseffekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justera vajerns justeringsmuttrar eller justeringsskruvarna för att uppnå full bromseffekt.</li> </ul>	Avståndet mellan bromsklaffen och hjulet får inte överstiga 2 mm.	
	Änddelarna på vajerhöljerna är skadade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut vajerhöljet.</li> </ul>		
	Bromshandtaget eller bromshuset är skadat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut bromshandtaget.</li> </ul>		
Kontrollera att fällmekanismen fungerar som den ska och att den är fri från defekter	När du fäller ihop enheten stannar den inte i ihopfällt läge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut delarna till fällmekanismen, inklusive fjädern.</li> </ul>		
	Skruven i fällskarven är lös.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätt tillbaka skruven.</li> <li>• Använd permanent låslim.</li> </ul>		
	Säkerhetsspärren är skadad eller deformerad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut säkerhetsspärren.</li> </ul>		

Kontrollpunkter	Möjligt problem	Åtgärd	Anmärkningar	OK
Kontrollera att handgreppen och handtagsröret sitter fast ordentligt och att de är fria från defekter.	Handgreppen är skadade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut handgreppen.</li> </ul>	Innan du monterar de nya handgreppen ska du rengöra rören med ett oljefritt fettlösningsmedel, t. ex. fönsterrengöringsvätska.	
	Handgreppen kan enkelt roteras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut handgreppen.</li> </ul>	Innan du monterar de nya handgreppen ska du rengöra rören med ett oljefritt fettlösningsmedel, t. ex. fönsterrengöringsvätska.	
	Justeringsvredet låses inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut vreden och låshylsorna.</li> </ul>		
	Handtagsrören är böjda eller skadade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut körhandtagen.</li> </ul>		
Kontrollera att ramen är fri från defekter.	Ramen är skadad eller defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kassera enheten.</li> </ul>		
	Lackeringen är skadad eller repad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd bättringsfärger för att reparera skadorna.</li> </ul>	Bättringsfärger finns tillgängliga som reservdelar.	
Kontrollera att sitsen och ryggstödet sitter fast ordentligt och att de är fria från defekter.	Ryggstödet eller ryggstödsfästena är skadade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut ryggstödet.</li> </ul>		
	Skruvarna på ryggstödet eller ryggstödsfästena är lösa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra åt skruvarna.</li> </ul>		
	Sitsen är skadad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt ut sitsen.</li> </ul>		

## 2.4 Rengöring

Produkten kan rengöras och desinficeras med vanliga rengöringsmedel.



### VIKTIGT

- Produkten måste rengöras minst en gång om året.
- Använd inte starka rengöringsmedel.
- Använd inte ångrengörare.
- Använd aldrig syra eller lösningsmedel.


- Produkten kan tvättas i tvättmaskin eller för hand.
- Tvätt- och torktemperaturen får inte överskrida 60° C.
- Högtryckstvätt eller vanlig vattenstråle kan användas. Rikta dock inte strålen mot lager, dräneringshål eller etiketter.
- Rengör med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
- Rengör hjulen med en borste (ej stålborste!).
- Torka produkten ordentligt när du har tvättat färdigt.

### Desinfektion

Desinficera produkten genom att torka av alla åtkomliga ytor med desinfektionsmedlet.

### 3 Teknisk Data

#### 3.1 Mått och vikt

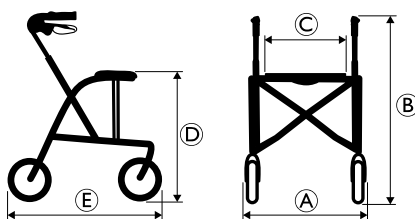

	[mm]	Gloss 450	Gloss 520	Gloss 600	Gloss 680
Total bredd A		520	595	600	610
Total höjd B		635 – 770	725 – 860	790 – 920	915 – 1050
Sittbredd C		370	445	445	445
Sitthöjd D		450	520	600	680
Total längd E		615	675	720	790
Bredd i hopfällt läge		240	190	190	190
Fram-/drivhjulens diameter		200			
Fram-/drivhjulens bredd		40			

Alla dimensioner är föremål för visst spelrum.

	[kg]	Gloss 450	Gloss 520	Gloss 600	Gloss 680
Vikt <sup>1</sup>		5.9	6.3	6.5	6.8
Brukarens maxvikt <sup>2</sup>		160			
Maxlast för korgen		7.0			
Maxlast för brickan		5.0			

#### 3.2 Material

Ram	Aluminium belagd med polyesterpulver
Körhandtag	Anodiserat aluminium
Handgrepp	TPE
Hjul	Polypropylen med däcktönster i TPE
Plastdelar	Material enligt märkning (PA, PP)
Skruvar	Rostfritt stål

1. Total vikt exklusive utrustning.
2. I denna viktbe gränsning ingår både själva brukarens vikt, antingen stående eller sittande, och eventuell ytterligare vikt, t.ex. innehållet i korgen.









## Invacare Sales Companies

### Suomi:

Camp Mobility  
Patamäenkatu 5, 33900  
Tampere  
Puhelin 09-35076310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

### Sverige:

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
S-163 53 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se



Invacare Rea AB  
Växjövägen 303  
SE-343 71 Diö  
Sweden

