

Lesen Sie VOR Beginn der Montage die gesamte Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
BEFORE assembling this accessory, read this instructions carefully and save for future reference.

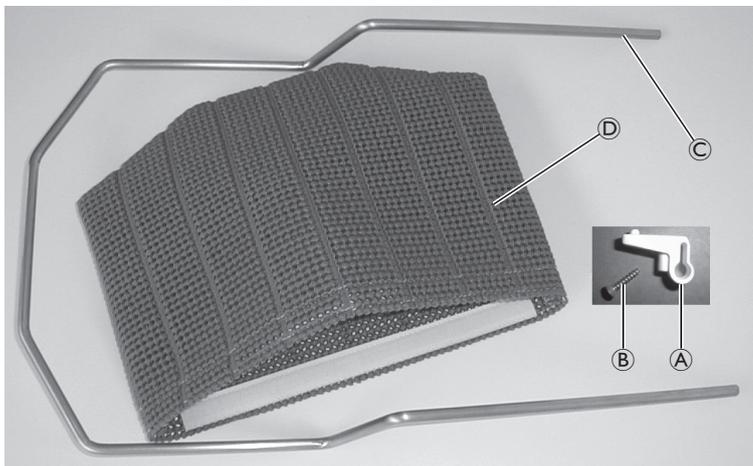


Fig. 1

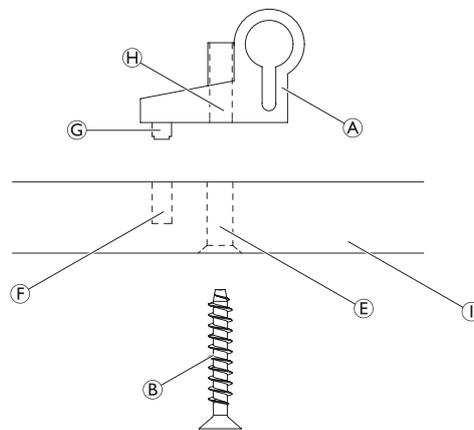


Fig. 3

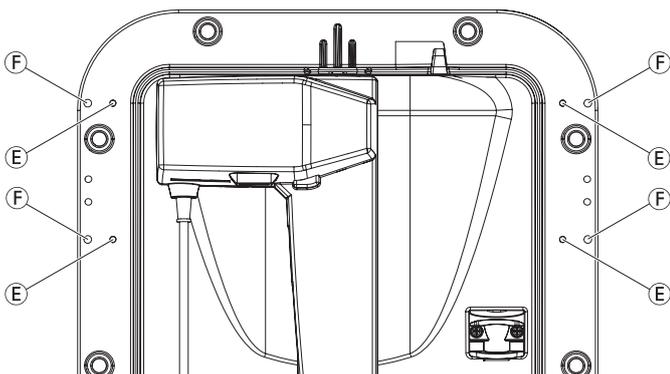


Fig. 2

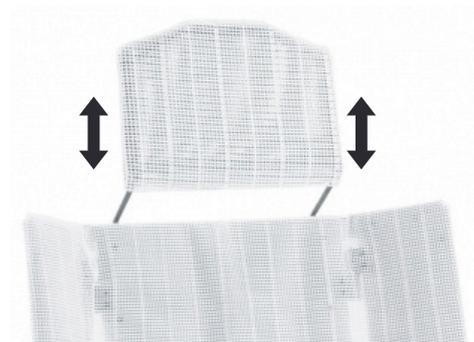


Fig. 4

Lieferumfang (Fig. 1)

Kopfstütze Aquatec® ORCA, weiß (Bestell-Nr. komplettes Set: 15461)

Kopfstütze Aquatec® ORCA, blau (Bestell-Nr. komplettes Set: 15462)

Pos.	Bezeichnung	Stück
(A)	Aufnahme (Kunststoffteil)	4
(B)	Senkkopfschraube Ø 4x20 (VA)	4
(C)	Rundstahlbügel Ø 8 mm (VA)	1
(D)	Bezug - Gewebematte mit Klettverschluss	1

Sicherheit



VORSICHT Verletzungsgefahr!

- Unfallverhütungsvorschriften der eingesetzten Werkzeuge und Maschinen beachten.
- Beim Durchbohren der Rückenlehne auf die Sicherheit der Finger achten.
- Beim Bohren eine ebene Unterlage benutzen (z.B. alte Holzplatte).
- Immer rechtwinklig zur Fläche bohren.

Vorbereitung

- I. Rückenlehnenbezug abknöpfen.

Für Rückenlehnen ohne vorhandene Montagebohrungen für die Kopfstütze folgende Schritte durchführen:

Werkzeug: Akkuschauber; Bohreinsätze: Kegelsenker 10 x 90°, Spiralbohrer Ø 4,2 mm

1. Gemäß Fig. 2 die vier Zentrierungen ⑤ mit Bohrer Ø 4,2 mm durchbohren (Bohrpositionen sind auf der Rückenlehne markiert).
2. Die vier Bohrungen ⑤ mit dem Kegelsenker von der Vorderseite (Bezugseite) der Rückenlehne auf Ø 8,5 mm ansenken.

Montage (Fig. 3)

Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2

1. Aufnahmen ④ durch die Bohrungen ⑤ auf der Rückseite der Rückenlehne ① mit Senkkopfschrauben ⑥ befestigen.

! WICHTIG

▸ Sicherstellen, dass die Pins ③ der Aufnahmen ④ in die Bohrungen ⑤ einrasten.

2. Rückenlehnenbezug wieder anknöpfen.
3. Sofern nicht bereits vormontiert, Kopfstützenbezug ② auf Rundstahlbügel ③ aufziehen und mit Klettverschluss fixieren.
4. Rundstahlbügel in die angeschraubten Aufnahmen einstecken.

Höhe der Kopfstütze einstellen (Fig. 4)

1. Rundstahlbügel mit Bezug auf beiden Seiten festhalten und **gleichzeitig** in den Aufnahmen in die gewünschte Höhe verschieben.

Scope of delivery (Fig. 1)

Head support Aquatec® ORCA, white (Order-no. complete set: 15461)

Head support Aquatec® ORCA, blue (Order-no. complete set: 15462)

Pos.	Designation	Qty.
④	Mountings (plastic part)	4
⑥	Countersunk head screw Ø 4x20 (VA)	4
③	Round steel bracket Ø 8 mm	1
②	Cover - woven mat with Velcro fastener	1

Safety



CAUTION Risk of injury!

- Follow the accident prevention regulations for the tools and machines used.
- Pay attention to the safety of your fingers when drilling through the backrest.
- Use an even surface when drilling (e.g. an old wooden board).
- Always drill orthogonally to the surface.

Preparation

1. Unbutton the backrest cover.

For backrests without existing headrest assembly drill holes carry out following steps:

Tools: Battery powered drill; Drill bits: Countersink bit 10 x 90°, twist drills Ø 4.2 mm

1. In accordance with Fig. 2 drill the four holes ⑤ with a Ø 4.2 mm twist drill (Drilling positions are marked on the backrest).
2. Countersink the 4 holes with Ø 4.2 mm ⑤ with the countersink bit on the front side (cover side) to Ø 8.5 mm.

Assembly (Fig. 3)

Tools: Phillips type screwdriver size 2

1. Screw the mountings ④ through holes ⑤ to the back of the backrest ① with countersunk head screws ⑥.

! IMPORTANT

▸ Make sure that the pins ③ of the mountings ④ engage in the holes ⑤.

2. Re-attach the backrest cover.
3. If not already pre-assembled, pull the headrest cover ② over the round steel bracket ③ and fasten with the Velcro fastener.
4. Insert the round steel bracket into the screwed on mountings.

Adjusting the height of the Head support (Fig. 4)

1. Hold the round steel bracket with cover on both sides and move **simultaneously** in the mountings to the desired position.



© 2021, Invacare GmbH, D-88316 Isny, all rights reserved.
Part No. 1471553-B / 2021-10

AQUATEC®



Yes, you can.