

Invacare® Action® Ampla™

ει Χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο
Εγχειρίδιο Χρήσης



Το παρόν εγχειρίδιο ΠΡΕΠΕΙ να παραδοθεί στο χρήστη του προϊόντος.
ΠΡΙΝ από τη χρήση αυτού του προϊόντος, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να διαβάσετε το
παρόν εγχειρίδιο και να το αποθηκεύσετε για μελλοντική αναφορά.



Yes, you can.®

© 2025 Invacare International GmbH

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αντιγραφή ή η τροποποίηση, ολική ή μερική, του παρόντος χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Invacare. Τα εμπορικά σήματα υποδεικνύονται με τα σύμβολα ™ και ®. Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Invacare International GmbH ή των θυγατρικών της ή της έχουν παραχωρηθεί με άδεια, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Περιεχόμενα

1 Γενικά	5
1.1 Εισαγωγή.....	5
1.2 Σύμβολα στο παρόν έγγραφο	5
1.3 Πληροφορίες εγγύησης	6
1.4 Συμμόρφωση.....	6
1.4.1 Πρότυπα ειδικά για το προϊόν	6
1.5 Διάρκεια λειτουργικής ζωής.....	6
1.6 Περιορισμός ευθύνης	6
2 Ασφάλεια	7
2.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια.....	7
2.2 Διατάξεις ασφαλείας.....	10
2.3 Ετικέτες και σύμβολα στο προϊόν	10
3 Επισκόπηση προϊόντος	12
3.1 Περιγραφή προϊόντος	12
3.2 Χρήση για την οποία προορίζεται.....	12
3.3 Κύρια μέρη του αναπηρικού αμαξιδίου	13
3.4 Φρένα στάθμευσης.....	15
3.5 Πλάτη καθίσματος	15
3.6 Υποπόδια.....	16
3.7 Βοήθημα μεταφοράς	18
3.8 Μαξιλάρι καθίσματος	18
4 Προαιρετικές επιλογές.....	19
4.1 Συσκευή προστασίας από ανατροπή	19
4.2 Ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος.....	20
4.3 Ράβδος ώθησης.....	22
4.4 Στατό ορού	22
4.5 Φρένα χρήσης από βοηθό	24
4.6 Βάση στήριξης μπαστούνιού	25
4.7 Βάση φιάλης οξυγόνου	25
5 Εγκατάσταση.....	26
5.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια.....	26

5.2 Έλεγχος κατά την παραλαβή.....	26
6 Χρήση.....	27
6.1 Πληροφορίες ασφαλείας	27
6.2 Φρενάρισμα κατά τη χρήση.....	27
6.3 Επιβίβαση και αποβίβαση από το αναπηρικό αμαξίδιο.....	28
6.4 Οδήγηση και διεύθυνση του αναπηρικού αμαξιδίου.....	30
6.5 Διέλευση από σκαλοπάτια και κράσπεδα	30
6.6 Διέλευση από ράμπες και επικλινείς δρόμους.....	32
6.7 Σταθερότητα και ισορροπία όταν κάθεστε.....	33
7 Μεταφορά	35
7.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια	35
7.2 Τροχήλατη βάση μεταφοράς	35
7.3 Αφαίρεση και τοποθέτηση των πίσω τροχών.....	36
7.4 Πώς να ανασκώσετε το αναπηρικό αμαξίδιο.....	37
7.5 Μεταφορά του χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου χωρίς τον χρήστη του καθισμένο	37
7.6 Μεταφορά του αναπηρικού αμαξιδίου σε όχημα μαζί με τον χρήστη του καθισμένο	38
8 Συντήρηση.....	44
8.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια	44
8.2 Χρονοδιάγραμμα συντήρησης.....	44
8.3 Καθαρισμός και απολύμανση.....	46
8.3.1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας	46
8.3.2 Διαστήματα καθαρισμού	47
8.3.3 Καθαρισμός.....	47
8.3.4 Απολύμανση.....	48
9 Μετά τη χρήση	49
9.1 Αποθήκευση.....	49
9.2 Αποκατάσταση.....	49
9.3 Απόρριψη.....	49
10 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	50
10.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια	50
10.2 Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών.....	51
11 Τεχνικά στοιχεία	52
11.1 Διαστάσεις και βάρος	52

11.2	Μέγιστο βάρος αποσπώμενων μερών.....	53
11.3	Ελαστικά.....	53
11.4	Υλικά.....	54
11.5	Περιβαλλοντικές συνθήκες	54

1 Γενικά

1.1 Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας.

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο αφού έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο. Ζητήστε επιπλέον συμβουλές από έναν επαγγελματία υγείας που είναι εξοικειωμένος με την ιατρική σας πάθηση και αποσαφηνίστε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη σωστή χρήση και την απαραίτητη προσαρμογή με τον επαγγελματία υγείας.

Να έχετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν ενότητες στο παρόν έγγραφο, οι οποίες δεν σχετίζονται με το δικό σας προϊόν, αφού το παρόν έγγραφο ισχύει για όλα τα διαθέσιμα μοντέλα (κατά την ημερομηνία εκτύπωσής του). Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε ενότητα στο παρόν έγγραφο αναφέρεται σε όλα τα μοντέλα του προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε τα διαθέσιμα μοντέλα και διαμορφώσεις στη χώρα σας στα έγγραφα πωλήσεων κάθε χώρας.

Η Invacare επιφυλάσσει του δικαιώματος να μεταβάλλει τις προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Πριν διαβάσετε το παρόν έγγραφο, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση ως αρχείο PDF στον ιστότοπο της Invacare.

Εάν βρίσκεστε δυσανάγνωστο το μέγεθος της γραμματοσειράς στο έντυπο έγγραφο, μπορείτε να κάνετε λήψη της έκδοσης PDF από τον ιστότοπο. Το αρχείο PDF μπορεί κατόπιν να προσαρμοστεί στην οθόνη σε μέγεθος γραμματοσειράς που θα είναι περισσότερο άνετο για εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, για παράδειγμα ειδοποιήσεις ασφαλείας και ανακλήσεις του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον διανομέα της Invacare. Στο τέλος του παρόντος εγγράφου αναγράφονται οι σχετικές διευθύνσεις.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος με το προϊόν, θα πρέπει να ενημερώσετε τον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή στη χώρα σας.

1.2 Σύμβολα στο παρόν έγγραφο

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται σύμβολα και προειδοποιητικές λέξεις που αφορούν κινδύνους ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή υλική βλάβη. Ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες για ορισμούς των προειδοποιητικών λέξεων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ήπιο ή ελαφρύ τραυματισμό.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρόκληση υλικών ζημιών.



Υποδείξεις και συστάσεις

Παρέχει χρήσιμες υποδείξεις, συστάσεις και πληροφορίες για αποτελεσματική χρήση χωρίς προβλήματα.

Άλλα σύμβολα

(Δεν ισχύουν για όλα τα εγχειρίδια)



Υπεύθυνος στο ΗΒ
Υποδεικνύει ότι ένα προϊόν δεν κατασκευάζεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Triman
Υποδεικνύει κανόνες ανακύκλωσης και διαλογής
(ισχύει μόνο στη Γαλλία).

1.3 Πληροφορίες εγγύησης

Παρέχουμε εγγύηση κατασκευαστή για το προϊόν σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Λειτουργίας μας στις αντίστοιχες χώρες.

Αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω του προμηθευτή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

1.4 Συμμόρφωση

Η ποιότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για τις εργασίες της εταιρίας, που λειτουργεί εντός των προβλέψεων του ISO 13485.

Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση CE, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 2017/745 ως Κατηγορίας Ι.

Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση UKCA, σε συμμόρφωση με το Μέρος II του Κανονισμού του 2002 του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (όπως τροποποιήθηκε) ως Κατηγορίας Ι.

Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες ώστε να διασφαλίζεται ότι η επίδραση της εταιρείας στο περιβάλλον, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, μειώνεται στο ελάχιστο.

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά υλικά και εξαρτήματα που είναι συμβατά με την οδηγία REACH.

1.4.1 Πρότυπα ειδικά για το προϊόν

Το αναπηρικό αμαξίδιο έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το EN 12183. Συμπεριλήφθηκαν δοκιμές ευφλεκτότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Invacare. Στο τέλος του παρόντος εγγράφου αναγράφονται οι σχετικές διευθύνσεις.

1.5 Διάρκεια λειτουργικής ζωής

Η προσδοκώμενη διάρκεια λειτουργικής ζωής αυτού του προϊόντος είναι πέντε έτη λειτουργίας όταν χρησιμοποιείται καθημερινά και σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας, τα διαστήματα συντήρησης και με σωστό τρόπο, όπως αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η πραγματική διάρκεια λειτουργικής ζωής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συχνότητα και την ένταση της χρήσης.

1.6 Περιορισμός ευθύνης

Η Invacare δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε:

- Μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο χρήσης
- Εσφαλμένη χρήση
- Φυσική φθορά και σχίσσιμο
- Εσφαλμένη συναρμολόγηση ή εγκατάσταση από τον αγοραστή ή τρίτο πρόσωπο
- Τεχνικές τροποποιήσεις
- Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση ακατάλληλων ανταλλακτικών

2 Ασφάλεια

2.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας για την προστασία του χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου και του βοηθού και για την ασφαλή χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου χωρίς προβλήματα.

Η Invacare θεωρεί ότι ένας επαγγελματίας υγείας έχει πραγματοποιήσει μια προσωπική αξιολόγηση του χρήστη για να καθορίσει το επίπεδο κινδύνου ή τις ανάγκες θεραπείας του. Οι πάροχοι και οι φροντιστές έχουν αξιολογήσει ότι το προϊόν παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη και ότι οι προσαρμογές του είναι κατάλληλες για τον χρήστη. Ο φροντιστής και ο χρήστης έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες από έναν επαγγελματία υγείας σχετικά με τον τρόπο σωστής και ασφαλούς χρήσης του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης

Η ακατάλληλη χρήση του παρόντος προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη.

- Εάν δεν μπορείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις προσοχής ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης ή έναν προμηθευτή πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν ή τυχόν διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε προηγουμένως διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες οδηγίες και τυχόν επιπλέον ενημερωτικό υλικό, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, το εγχειρίδιο συντήρησης ή το φύλλο οδηγιών που παρέχονται με το παρόν προϊόν ή με προαιρετικό εξοπλισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή καπνού, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού, όταν δεν είναι σε θέση να απομακρυνθούν από την πηγή της φωτιάς ή του καπνού. Τα αναμμένα σπέρτα, οι αναπτήρες και τα τσιγάρα μπορούν να προκαλέσουν γυμνή φλόγα στο περιβάλλον του αναπηρικού αμαξιδίου ή στα ρούχα.

- Αποφύγετε τη χρήση ή την αποθήκευση του αναπηρικού αμαξιδίου κοντά σε γυμνές φλόγες ή εύφλεκτα προϊόντα.
- Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το αναπηρικό αμαξίδιο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ατυχημάτων και σοβαρού τραυματισμού

Μπορεί να προκληθούν ατυχήματα με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό εάν το αναπηρικό αμαξίδιο δεν ρυθμιστεί σωστά.

- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του αναπηρικού αμαξιδίου σας, ώστε ένας εξειδικευμένος τεχνικός να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ανατροπής

Η διαμήκης θέση του άξονα των πίσω τροχών του αναπηρικού αμαξιδίου σε σύγκριση με τη θέση της πλάτης μπορεί να επηρεάσει την ευστάθειά του.

- Η μετακίνηση του άξονα των πίσω τροχών προς τα εμπρός καθιστά το αναπηρικό αμαξίδιο λιγότερο σταθερό, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανατροπής προς τα πίσω. Αλλά βελτιώνει την ευελιξία με καλύτερη θέση πρόσφυσης της χειρολαβής και μικρή ακτίνα στροφής.
- Η μετακίνηση του άξονα των πίσω τροχών προς τα πίσω καθιστά το αναπηρικό αμαξίδιο πιο σταθερό και έτσι θα γέρνει λιγότερο εύκολα. Αλλά μειώνει την ευελιξία.
- Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητές σας και τα όρια ασφαλείας σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια συσκευή προστασίας από ανατροπή για να αντισταθμίσετε τη μείωση της σταθερότητας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος λόγω ακατάλληλου τρόπου οδήγησης για τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης σε βρεγμένο έδαφος, χαλίκι ή ανώμαλο έδαφος.

- Να προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητά σας και τον τρόπο οδήγησής σας στις συνθήκες (καιρός, οδόστρωμα, ατομικές ικανότητες κ.λπ.).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού

Σε περίπτωση σύγκρουσης, ενδέχεται να τραυματιστείτε σε μέρη του σώματός σας που εκτείνονται πέρα από το αναπηρικό αμαξίδιο (π.χ. πόδια ή χέρια).

- Αποφύγετε μια σύγκρουση χωρίς φρενάρισμα.
- Ποτέ μην οδηγείτε προς ένα αντικείμενο μετωπικά.
- Να οδηγείτε προσεκτικά μέσα από στενά περάσματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος εάν χαθεί ο έλεγχος του αναπηρικού αμαξιδίου

Η υψηλή ταχύτητα μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο του αναπηρικού αμαξιδίου με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

- Μην υπερβαίνετε ποτέ την ταχύτητα των 7 χλμ./ώρα.
- Αποφεύγετε γενικά τις συγκρούσεις.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού

- Σε περίπτωση κατακλίσεων ή τραυματισμένου δέρματος, προστατέψτε τα τραύματά σας για να αποφύγετε την άμεση επαφή με τα υφάσματα του προϊόντος. Απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας για ιατρικές συμβουλές.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων

Τα εξαρτήματα του αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να θερμανθούν εάν εκτεθούν σε εξωτερικές πηγές θερμότητας.

- Μην εκθέτετε το αναπηρικό αμαξίδιο σε έντονο ηλιακό φως πριν από τη χρήση.
- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη θερμοκρασία όλων των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος μαγκώματος των δακτύλων

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πιαστούν μέρη του σώματος, π.χ. δάκτυλα ή χέρια, στα κινούμενα μέρη του αναπηρικού αμαξιδίου.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν πιάνεται τίποτα όταν ενεργοποιείτε τους μηχανισμούς αναδίπλωσης ή εισαγωγής κινούμενων μερών, όπως ο αφαιρούμενος άξονας του πίσω τροχού ή η αναδιπλούμενη πλάτη.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ανατροπής

Η ανάρτηση πρόσθετου φορτίου (σακίδιο πλάτης ή παρόμοια είδη) στους στύλους της πλάτης του αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να επηρεάσει την οπίσθια ευστάθεια του αναπηρικού αμαξιδίου σας.

- Συνιστούμε θερμά τη χρήση συσκευής προστασίας από ανατροπή (διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ) όταν χρησιμοποιείτε τους στύλους υποστήριξης πλάτης με πρόσθετο φορτίο.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού

Μη γνήσια ή λανθασμένα ανταλλακτικά ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία και την ασφάλεια του προϊόντος.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά στη χρήση του προϊόντος.
- Λόγω τοπικών διαφορών, ανατρέξτε στον τοπικό κατάλογο ή ιστότοπο της Invacare για τις διαθέσιμες επιλογές ή επικοινωνήστε με τον διανομέα της Invacare. Στο τέλος του παρόντος εγγράφου αναγράφονται οι σχετικές διευθύνσεις.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κατά τον συνδυασμό του παρόντος προϊόντος με άλλο προϊόν, ισχύουν οι περιορισμοί και των δύο προϊόντων. Π.χ. το μέγιστο βάρος χρήστη ενός προϊόντος ενδέχεται να είναι χαμηλότερο στον συνδυασμό.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο τους συνδυασμούς που επιτρέπονται από την Invacare. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διανομέα της Invacare.
- Πριν από τη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης κάθε προϊόντος και ελέγξτε τους περιορισμούς. Η πλήρης συμμόρφωση με τις πληροφορίες, τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιέχονται και στα δύο εγχειρίδια χρήσης είναι απαραίτητη για την ασφαλή χρήση.

2.2 Διατάξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ατυχημάτων

Οι διατάξεις ασφαλείας που δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά ή δεν λειτουργούν πλέον (ασφάλειες τροχών, συσκευές προστασίας από ανατροπή, κιτ μεταφοράς, ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος) μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

– Να ελέγχετε πάντα ότι οι διατάξεις ασφαλείας λειτουργούν πριν χρησιμοποιήσετε το αναπηρικό αμαξίδιο και να μεριμνάτε για τον τακτικό τους έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από τον προμηθευτή σας.

Οι λειτουργίες των διατάξεων ασφαλείας περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3 *Κύρια μέρη του αναπηρικού αμαξιδίου*, σελίδα 13.

2.3 Ετικέτες και σύμβολα στο προϊόν

Ετικέτα προσδιορισμού στοιχείων

Η ετικέτα προσδιορισμού στοιχείων είναι επικολλημένη στο πλαίσιο του αναπηρικού αμαξιδίου σας και παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:




- A Διεύθυνση κατασκευαστή
- B Γραμμωτός κώδικας
- C Ευρωπαϊκή συμμόρφωση
- D Συμμόρφωση με το Ηνωμένο Βασίλειο
- E Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης
- F Ιατροτεχνολογικό προϊόν
- G Μέγιστο βάρος χρήστη
- H Γραμμωτός κώδικας σειριακού αριθμού
- I Σειριακός αριθμός
- J Αριθμός αναφοράς
- K Πλάτος καθίσματος


- Ⓛ Περιγραφή προϊόντος
- Ⓜ Ημερομηνία κατασκευής

	Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης
	Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Ετικέτα πληροφοριών ζώνης υποστήριξης της στάσης του σώματος

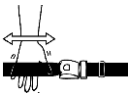	Η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος έχει το σωστό μήκος όταν η επίπεδη παλάμη χωράει ακριβώς ανάμεσα στο σώμα και τη ζώνη.
--	--

Ετικέτα τροχήλατης βάσης μεταφοράς

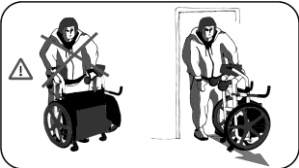	Ετικέτα για τη σωστή χρήση της τροχήλατης βάσης μεταφοράς, βλ. 7.2 Τροχήλατη βάση μεταφοράς, σελίδα 35. Η ετικέτα είναι προσαρτημένη στην μπροστινή εγκάρσια ράβδο του πλαισίου.
--	--

Σύμβολο καραμπίνας

	Θέσεις πρόσδεσης όπου πρέπει να τοποθετούνται οι ιμάντες του συστήματος συγκράτησης σε περίπτωση μεταφοράς του κατελιγμένου από τον χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου σε μηχανοκίνητο όχημα. Αυτό το σύμβολο είναι προσαρτημένο στο αναπηρικό αμαξίδιο μόνο όταν παραγγέλλεται με το προαιρετικό κιτ μεταφοράς.
---	--

	Σύμβολο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Αυτό το αναπηρικό αμαξίδιο δεν έχει διαμορφωθεί για μεταφορά επιβατών σε μηχανοκίνητο όχημα. Αυτό το σύμβολο είναι προσαρτημένο στο πλαίσιο κοντά στην ετικέτα αναγνώρισης
---	---

3 Επισκόπηση προϊόντος

3.1 Περιγραφή προϊόντος

Το Invacare Action Ampla είναι ένα ενεργό αναπηρικό αμαξίδιο μεσαίας δραστηριότητας, βελτιστοποιημένο για βαριατρική χρήση. Το αναπηρικό αμαξίδιο διαθέτει δύο πίσω τροχούς, δύο μπροστινά ροδάκια, κάθισμα και πλάτη με ταπηταρία, χειρόφρενα, αποσπώμενα υποπόδια, βοηθήματα μεταφοράς και άκαμπτο πλαίσιο.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το αναπηρικό αμαξίδιο κατασκευάζεται και διαμορφώνεται ξεχωριστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας. Οι προδιαγραφές πρέπει να συνταχθούν από επαγγελματία υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την κατάσταση της υγείας του χρήστη.

- Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας εάν σκοπεύετε να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση του αναπηρικού αμαξιδίου.
- Οποιαδήποτε προσαρμογή πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

3.2 Χρήση για την οποία προορίζεται

Αυτό το ενεργό αναπηρικό αμαξίδιο μεσαίας δραστηριότητας προορίζεται για την παροχή κινητικότητας σε υπέρβαρα άτομα με περιορισμένη ικανότητα βάδισης.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ίδρυμα ή κατ' οίκον νοσηλεία. Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε επίπεδο και προσβάσιμο έδαφος.

Προβλεπόμενοι χρήστες

Το βάρος του χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο βάρος χρήστη, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Τεχνικά στοιχεία» και στην ετικέτα προσδιορισμού στοιχείων.

Ο προβλεπόμενος χρήστης είναι το άτομο που κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο ή ένας βοηθός. Ο χρήστης πρέπει να είναι σωματικά και διανοητικά σε θέση να χρησιμοποιεί το αναπηρικό αμαξίδιο με ασφάλεια (π.χ. να το προωθεί, να το κατευθύνει, να το φρενάρει).

Ενδείξεις


Ενήλικες υπέρβαροι ηλικίας 15 ετών και άνω (έφηβοι και ενήλικες) με κινητικές δυσκολίες και περιορισμένη ικανότητα βάδισης που:

- Βιώνουν πόνο στο μυοσκελετικό σύστημα κατά το περπάτημα ή την ορθοστασία.
- Έχουν περιορισμένη χωρητικότητα πνευμόνων.

Αντενδείξεις

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις όταν το αναπηρικό αμαξίδιο χρησιμοποιείται όπως προορίζεται.

3.3 Κύρια μέρη του αναπηρικού αμαξιδίου

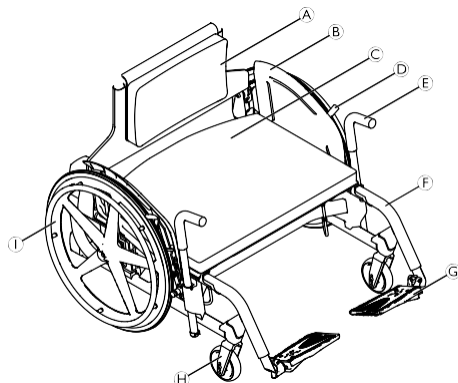


Θέση	Εξάρτημα	Περιγραφή/Χρήση/Προσαρμογές βλ. ...
Ⓐ	Πλάτη με μαξιλάρι	3.5 Πλάτη καθίσματος, σελ. 15
Ⓑ	Προστατευτικό ρουχισμού	—
Ⓒ	Κάθισμα με μαξιλάρι καθίσματος	3.8 Μαξιλάρι καθίσματος, σελίδα 18
Ⓓ	Φρένα στάθμευσης	3.4 Φρένα στάθμευσης, σελίδα 15
Ⓔ	Βοήθημα μεταφοράς	3.7 Βοήθημα μεταφοράς, σελίδα 18
Ⓕ	Υποπόδιο	3.6 Υποπόδια, σελίδα 16
Ⓖ	Πέλμα	—
Ⓗ	Περώνη ροδών με τροχό ροδών	—
Ⓘ	Πίσω τροχός με στεφάνη κύλισης χειρός	7.3 Αφαίρεση και τοποθέτηση των πίσω τροχών, σελίδα 36



Ο εξοπλισμός του αναπηρικού αμαξιδιού σας ενδέχεται να διαφέρει από το σχεδιάγραμμα, καθώς κάθε αναπηρικό αμαξίδιο κατασκευάζεται ξεχωριστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας.

Επισκόπηση πρόσθετων εξαρτημάτων

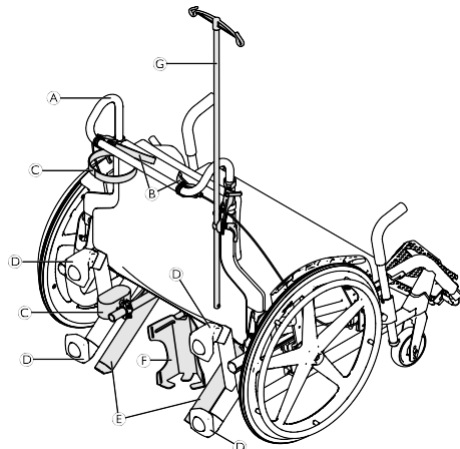

Θέση	Εξάρτημα	Περιγραφή/Χρήση/Προσαρμογές βλ. ...
Α	Ράβδος ώθησης	4.3 Ράβδος ώθησης, σελίδα 22
Β	Φρένα βοηθού	4.5 Φρένα βοηθού, σελίδα 24
Γ	Βάση στήριξης μπαστουνιού	4.6 Βάση στήριξης μπαστουνιού, σελίδα 25
Δ	Τροχήλατη βάση μεταφοράς	7.2 Τροχήλατη βάση μεταφοράς, σελίδα 35
Ε	Συσκευή προστασίας από ανατροπή	4.1 Συσκευή προστασίας από ανατροπή, σελίδα 19
Ζ	Βάση φιάλης οξυγόνου	4.7 Βάση φιάλης οξυγόνου, σελίδα 25
Η	Στατό ορού	4.4 Στατό ορού, σελίδα 22

3.4 Φρένα στάθμευσης

Τα φρένα στάθμευσης χρησιμοποιούνται για την ακινητοποίηση του αναπηρικού αμαξιδίου όταν είναι ακίνητο, ώστε να μην κυλίσει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ανατροπής εάν φρενάρετε απότομα

Εάν ενεργοποιήσετε τα φρένα στάθμευσης ενώ κινείστε, η κατεύθυνση της κίνησης μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη και το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να σταματήσει απότομα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ή σε πτώση σας από το αμαξίδιο.

– Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα φρένα στάθμευσης ενώ κινείστε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος εάν χαθεί ο έλεγχος του αναπηρικού αμαξιδίου

- Τα φρένα στάθμευσης πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
- Μη χρησιμοποιείτε τα φρένα στάθμευσης για να επιβραδύνετε το αναπηρικό αμαξίδιο.
- Μην ακουμπάτε στα φρένα στάθμευσης για να στηριχθείτε ή για τη μεταφορά σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Κίνδυνος παγίδευσης ή σύνθλιψης

Ενδέχεται να υπάρχει πολύ μικρό κενό μεταξύ του πίσω τροχού και του φρένου στάθμευσης που ενέχει κίνδυνο παγίδευσης των δακτύλων σας.

– Κρατήστε τα δάκτυλά σας μακριά από τα κινούμενα μέρη κατά τη χρήση του φρένου και να έχετε πάντα το χέρι σας στον μοχλό φρένου.




Η απόσταση ανάμεσα στο πέλμα (σιαγόνα) του φρένου και το ελαστικό μπορεί να ρυθμιστεί. Η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

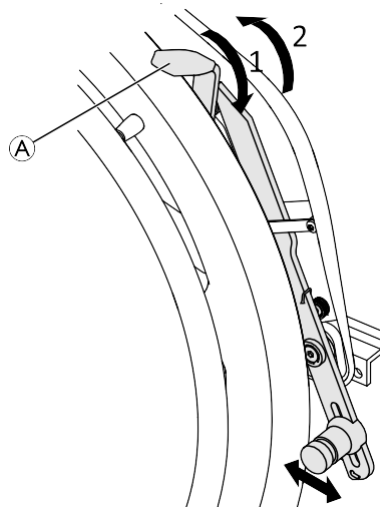

1. Για να συμπλέξετε το φρένο στάθμευσης, ωθήστε με την παλάμη τον μοχλό **A** προς τα εμπρός όσο το δυνατόν πιο μακριά.
2. Για να αποσυμπλέξετε το φρένο στάθμευσης, τραβήξτε τον μοχλό προς τα πίσω πιάνοντάς τον με τα δάκτυλα.

3.5 Πλάτη καθίσματος

Η πλάτη του καθίσματος μπορεί να αναδιπλωθεί για να κλείσει.

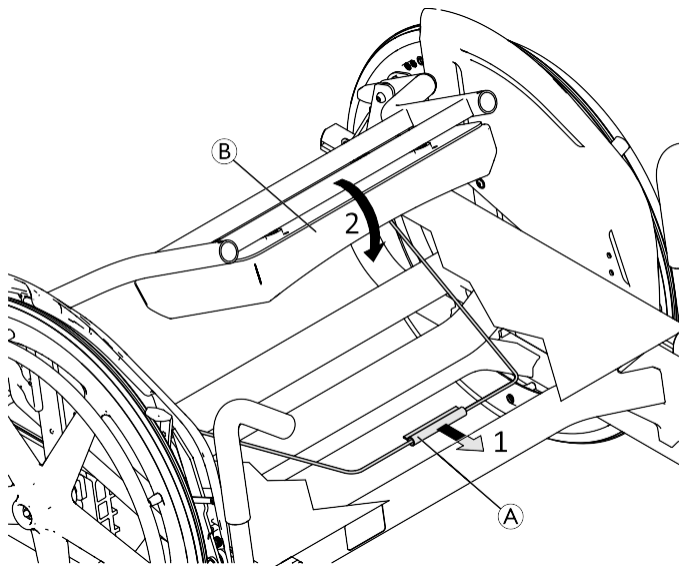

Κλείσιμο της πλάτης

1. Για να κλείσετε την πλάτη, πιάστε το καλώδιο (A) που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του αναπηρικού αμαξιδίου και τραβήξτε τον προς τα εμπρός.
2. Ταυτόχρονα, πιέστε την πλάτη του καθίσματος (B) προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει με ένα ηχητικό «κλικ».

Άνοιγμα της πλάτης

1. Για να ανοίξετε την πλάτη, κρατήστε το επάνω μέρος της πλάτης και ανοίξτε την προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει με ένα ηχητικό «κλικ».



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος βλάβης του αναπηρικού αμαξιδίου

- Μην κάθεστε στο αναπηρικό αμαξίδιο όταν η πλάτη είναι αναδιπλωμένη στην κλειστή θέση.

Αφαίρεση του μαξιλαριού πλάτης



Το μαξιλάρι πλάτης είναι στερεωμένο στην πλάτη με ιμάντες τύπου velcro (χριτς χρατς) και μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για καθαρισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το να κάθεστε στο αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς να έχετε τοποθετήσει μαξιλάρι πλάτης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη και άβολη στάση καθίσματος.

- Μην κάθεστε στο αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς να έχετε τοποθετήσει το μαξιλάρι πλάτης.

3.6 Υποπόδια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού

- Μην ανασηκώνετε ποτέ το αναπηρικό αμαξίδιο από τα στηρίγματα πελμάτων ή τα υποπόδια.



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Κίνδυνος παγίδευσης ή σύνθλιψης των δακτύλων

Υπάρχουν περιστρεφόμενοι μηχανισμοί στους οποίους θα μπορούσαν να πιαστούν τα δάκτυλά σας.

- Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση, την περιστροφή ή την αποσυναρμολόγηση αυτού του μηχανισμού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**


Κίνδυνος ζημιάς στον μηχανισμό του υποποδίου
– Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μη στέκεστε πάνω στο υποπόδιο.

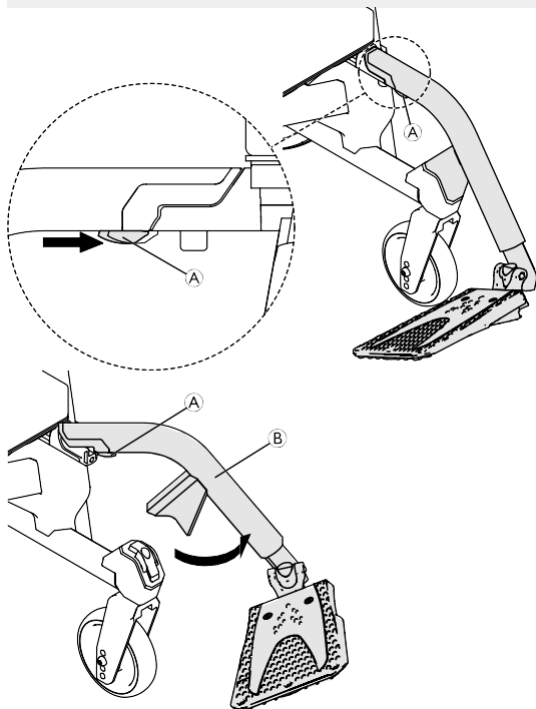**Περιστροφή προς τα έξω**

1. Ενεργοποιήστε τον μοχλό απελευθέρωσης ①, σηκώστε ελαφρά το υποπόδιο ② και στρέψτε το προς τα έξω.

Περιστροφή προς τα εμπρός

1. Στρέψτε το υποπόδιο προς τα εμπρός μέχρι να σταθεροποιηθεί στη θέση του.


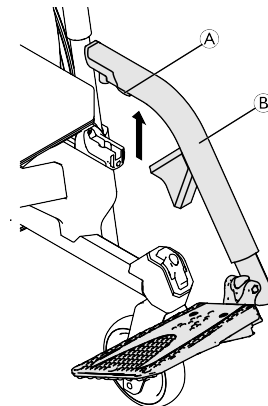
**Αφαίρεση**

1. Ενεργοποιήστε τον μοχλό απελευθέρωσης ①.
2. Τραβήξτε το υποπόδιο ② προς τα πάνω.

Τοποθέτηση

1. Περάστε το υποπόδιο στο μπροστινό μέρος του πλαισίου και μετακινήστε το προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει με ένα ηχητικό «κλικ».

3.7 Βοήθημα μεταφοράς

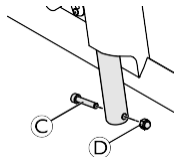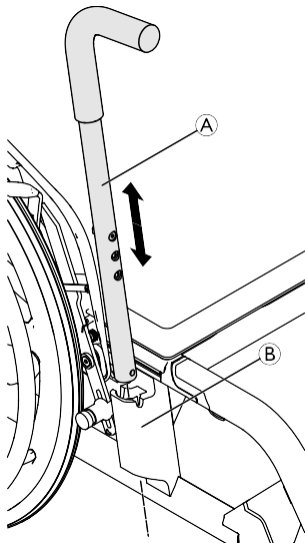

Αφαίρεση/Εγκατάσταση

1. Αφαιρέστε το μπουλόνι © και το παξιμάδι ④.
2. Αφαιρέστε το βοήθημα μεταφοράς ① απλώς τραβώντας το έξω από τη θήκη ②.
3. Επανατοποθετήστε το βοήθημα μεταφοράς πιέζοντάς το πλήρως μέσα στη θήκη.
4. Επανατοποθετήστε το μπουλόνι και ασφαλίστε το με το παξιμάδι.

3.8 Μαξιλάρι καθίσματος

Για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο κάθισμα, συνιστάται ένα κατάλληλο μαξιλάρι.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προσθήκη μαξιλαριού στο κάθισμα θα αυξήσει το ύψος σας από το έδαφος και μπορεί να επηρεάσει την ευστάθειά σας προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν αλλάξετε μαξιλάρι, μπορεί επίσης να αλλάξει και η ευστάθεια του χρήστη.


– Αν το πάχος του μαξιλαριού αλλάξει ή επιλεχθεί διαφορετικό μοντέλο μαξιλαριού, πρέπει να γίνει πλήρης ρύθμιση του αναπηρικού αμαξιδίου από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.



Αφαιρέστε το επάνω μαλακό στρώμα από το κάθισμα για να μη γλιστρήσει το μαξιλάρι του καθίσματος.

4 Προαιρετικές επιλογές

4.1 Συσκευή προστασίας από ανατροπή

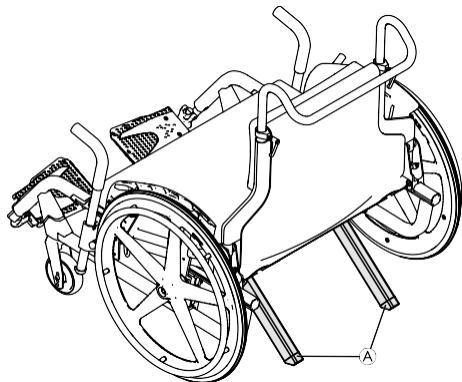

Οι συσκευές προστασίας από ανατροπή **A** εμποδίζουν την ανατροπή του αναπηρικού αμαξιδίου προς τα πίσω. Οι συσκευές προστασίας από ανατροπή είναι προεγκατεστημένες και διατίθενται προαιρετικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ανατροπής

Η λανθασμένη ρύθμιση ή η μη λειτουργία των συσκευών προστασίας από ανατροπή μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή.

- Ελέγχετε πάντα τη συσκευή προστασίας από ανατροπή ως προς τη λειτουργία της πριν χρησιμοποιήσετε το αναπηρικό αμαξίδιο και μεριμνήστε για την τοποθέτηση ή την επαναρρύθμισή της από ειδικευμένο τεχνικό όταν αυτό είναι απαραίτητο.
- Σε ορισμένες διαμορφώσεις, η στατική σταθερότητα του αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να είναι χαμηλότερη από 10°. Ως εκ τούτου, η Invacare συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση συσκευής προστασίας από ανατροπή (διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ανατροπής

Σε ανώμαλο ή μαλακό έδαφος, οι συσκευές προστασίας από ανατροπή μπορεί να βυθιστούν σε λακκούβες ή απευθείας στο έδαφος, με αποτέλεσμα η λειτουργία ασφαλείας τους να είναι περιορισμένη ή να εξαλειφθεί τελείως.

- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές προστασίας από ανατροπή μόνο όταν κινείστε σε ομαλό και σταθερό έδαφος.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στο αμαξίδιο

Η συσκευή προστασίας από ανατροπή ή η τροχήλατη βάση μεταφοράς μπορεί να σπάσει λόγω κόπωσης του υλικού όταν πατάτε πάνω της και ασκείτε δύναμη.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προστασίας από ανατροπή ή την τροχήλατη βάση μεταφοράς ως βοήθημα κλίσης.



Ως εναλλακτική λύση στις συσκευές προστασίας από ανατροπή, διατίθεται μια τροχήλατη βάση μεταφοράς που περιλαμβάνει ήδη τη λειτουργία προστασίας από ανατροπή, βλ. 7.2 *Τροχήλατη βάση μεταφοράς, σελίδα 35*.

4.2 Ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να εξοπλιστεί με ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος. Η ζώνη αυτή προστατεύει τον χρήστη από το να γλιστρήσει από το αναπηρικό αμαξίδιο ή να πέσει από αυτό. Η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος δεν αποτελεί βοήθημα σωστής τοποθέτησης στο αμαξίδιο.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού / στραγγαλισμού

Μια χαλαρή ζώνη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να γλιστρήσει και να πέσει με κίνδυνο να στραγγαλιστεί.

- Η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος πρέπει να τοποθετηθεί στο αμαξίδιο από εξειδικευμένο τεχνικό και να εφαρμοστεί από τον υπεύθυνο συνταγογραφούνται ιατρό.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος εφαρμόζει σφιχτά γύρω από το κάτω μέρος της λεκάνης.
- Να ελέγχετε εάν η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος εφαρμόζει σωστά κάθε φορά που χρησιμοποιείται. Η αλλαγή της γωνίας του καθίσματος ή/και της πλάτης, η αλλαγή του μαξιλαριού, ακόμη και των ρούχων σας, επηρεάζει την εφαρμογή της ζώνης.

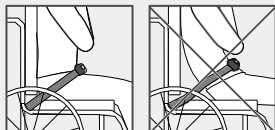


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού κατά τη μεταφορά
Μέσα σε όχημα, ο χρήστης στο αναπηρικό αμαξίδιο του πρέπει να είναι ασφαλισμένος με ζώνη ασφαλείας (ζώνη 3 σημείων). Η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος δεν επαρκεί ως προσωπική διάταξη συγκράτησης.

- Χρησιμοποιήστε τη ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος συμπληρωματικά, αλλά όχι ως υποκατάστατο της ζώνης ασφαλείας 3 σημείων, όταν μεταφέρετε τον χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου σε όχημα.

Άνοιγμα και κλείσιμο της ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος

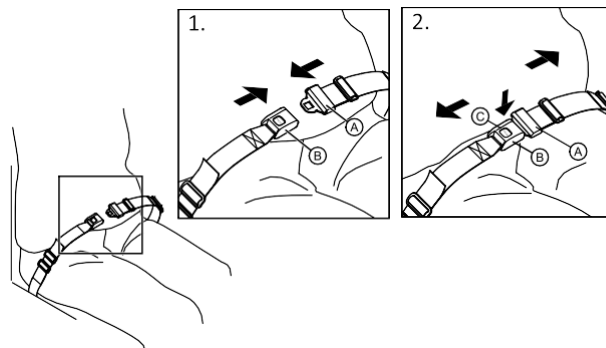


Βεβαιωθείτε ότι κάθεστε τελείως πίσω στο κάθισμα με τη λεκάνη σας να είναι όσο το δυνατόν πιο όρθια και συμμετρική.

1. Για να κλείσετε τη ζώνη, σπρώξτε το γλωσσίδι (A) μέσα στην πόρπη (B).
2. Για να την ανοίξετε, πατήστε το κουμπί PRESS (C) και τραβήξτε το γλωσσίδι (A) από την πόρπη (B).

Προσαρμογή του μήκους



Η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος έχει σωστό μήκος όταν η επίπεδη παλάμη χωράει ακριβώς ανάμεσα στο σώμα και τη ζώνη.

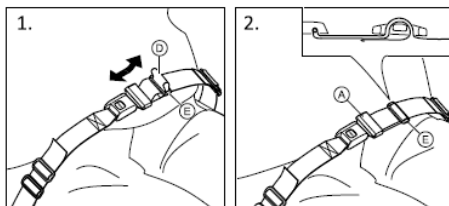

1. Κοντύνετε ή μακρύνετε τη θηλιά ① ανάλογα με τις ανάγκες σας.
2. Περάστε τη θηλιά ① μέσα από το γλωσσίδι ① και την πλαστική πόρπη ② μέχρι η θηλιά να γίνει επίπεδη.


Εάν αυτή η ρύθμιση δεν είναι επαρκής, ενδέχεται να χρειαστεί να επαναποθετήσετε τη ζώνη υποστήριξης στα σημεία στερέωσης.

Τοποθέτηση της ζώνης υποστήριξης της στάσης του σώματος στα σημεία στερέωσης



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Περάστε τη θηλιά της ζώνης και στις δύο πλαστικές πόρπες για να αποφύγετε να χαλαρώσει η ζώνη.
- Κάντε τις ίδιες προσαρμογές και στις δύο πλευρές, ώστε το κούμπωμα της πόρπης να παραμείνει σε κεντρική θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες δεν πιάνονται στις ακτίνες του πίσω τροχού.

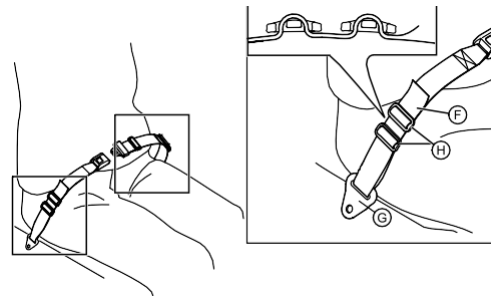

1. Περάστε τη θηλιά της ζώνης ③ μέσα από το σημείο στερέωσης στο κάθισμα ④ και μετά μέσα από τις δύο πλαστικές πόρπες ⑤.


4.3 Ράβδος ώθησης

Προαιρετικά, μπορεί να εγκατασταθεί μια ράβδος ώθησης.

Απαιτείται μια εγκατεστημένη ράβδος ώθησης για τις ακόλουθες επιλογές:

- Φρένο βοηθού
- Στατό ορού


Εγκατάσταση/αφαίρεση

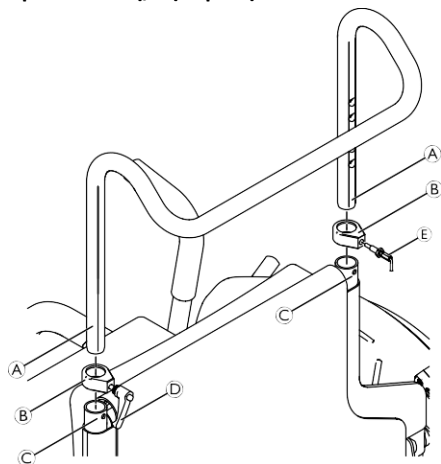

1. Τοποθετήστε και τα δύο εξαρτήματα σύσφιξης **B** στα άκρα των στύλων της πλάτης **C**. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές των εξαρτημάτων σύσφιξης είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές των άκρων του στύλου της πλάτης.
2. Τοποθετήστε τη ράβδο ώθησης **A** στους στύλους της πλάτης.
3. Μετακινήστε τη ράβδο ώθησης στο απαιτούμενο ύψος και βιδώστε τον πείρο γρήγορης απελευθέρωσης **E** στο εξάρτημα σύσφιξης. Αφήστε τον πείρο να ασφαλίσει στην πλησιέστερη οπή στη ράβδο ώθησης.

4. Ασφαλίστε τη ράβδο ώθησης στον στύλο πλάτης στην άλλη πλευρά, περιστρέφοντας τον μοχλό **D** του εξαρτήματος σύσφιξης δεξιόστροφα.
5. Για να αφαιρέσετε τη ράβδο ώθησης, ακολουθήστε αντίστροφα τα βήματα 3 έως 1.

Προσαρμογή του ύψους

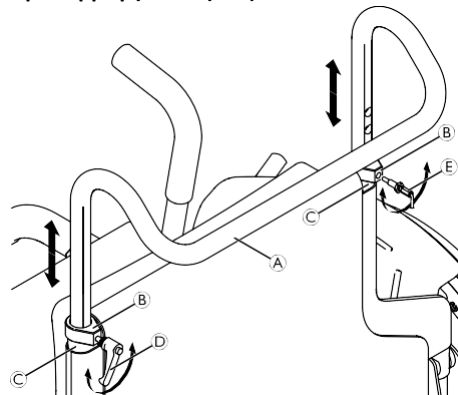


1. Χαλαρώστε και τα δύο εξαρτήματα σύσφιξης **B** περιστρέφοντας τον μοχλό **D** αριστερόστροφα και αποσυνδέοντας τον πείρο γρήγορης απελευθέρωσης **E** στην άλλη πλευρά.
2. Μετακινήστε τη ράβδο ώθησης **A** στο απαιτούμενο ύψος και αφήστε τον πείρο γρήγορης απελευθέρωσης να ασφαλίσει στην πλησιέστερη οπή της ράβδου ώθησης.
3. Ασφαλίστε τη ράβδο ώθησης στον στύλο πλάτης στην άλλη πλευρά, περιστρέφοντας τον μοχλό **D** του εξαρτήματος σύσφιξης δεξιόστροφα.

4.4 Στατό ορού

Για την εγκατάσταση του στατό ορού, το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τη ράβδο ώθησης.

Εγκατάσταση

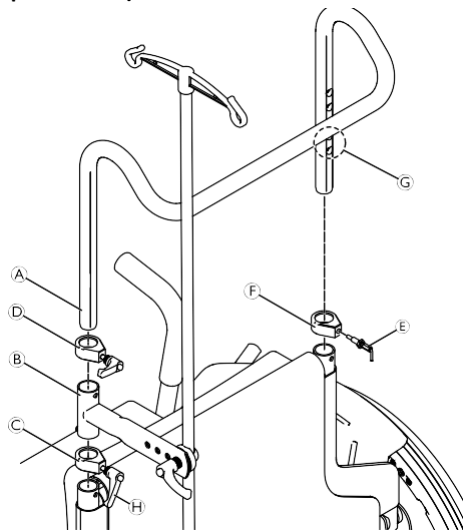


1. Χαλαρώστε το εξάρτημα σύσφιξης © περιστρέφοντας τον μοχλό Η αριστερόστροφα.
2. Χαλαρώστε το εξάρτημα σύσφιξης F τραβώντας τον πείρο γρήγορης απελευθέρωσης Ε.
3. Αφαιρέστε τη ράβδο ώθησης Α.
4. Τοποθετήστε τη βάση του στατό ορού Β στο εξάρτημα σύσφιξης ©.
5. Τοποθετήστε το εξάρτημα σύσφιξης D στη βάση του στατό ορού.
6. Εισαγάγετε τη ράβδο ώθησης μέσα από τα εξαρτήματα D, B και C στον στύλο πλαισίου (μόνο μέσω του εξαρτήματος σύσφιξης F στην άλλη πλευρά).

7. Αφήστε τον πείρο γρήγορης απελευθέρωσης Ε να ασφαλίσει σε μία από τις δύο κάτω οπές @ στη ράβδο ώθησης.
8. Ασφαλίστε τη ράβδο ώθησης περιστρέφοντας τον μοχλό Η και D δεξιόστροφα.

Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας

- i Ο στύλος του στατό ορού πρέπει πάντα να είναι τοποθετημένος σε κάθετη θέση, δηλαδή υπό γωνία 90° σε σχέση με το δάπεδο, ανεξάρτητα από τη θέση της πλάτης ή του αναπηρικού αμαξιδίου.

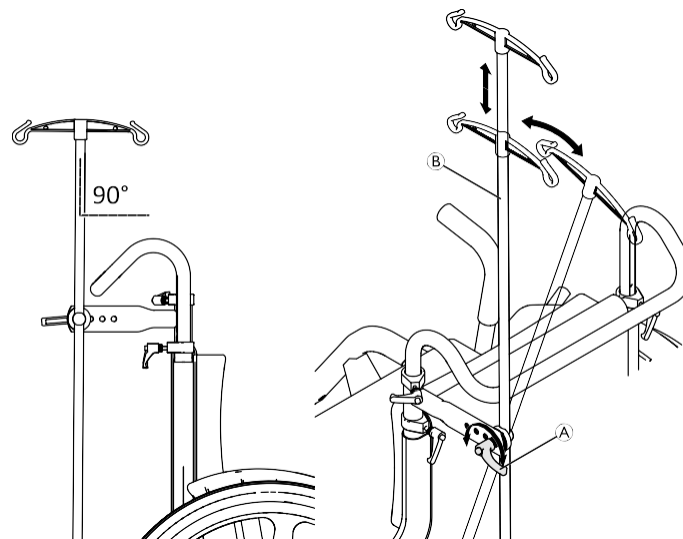

1. Χαλαρώστε τον μοχλό ①.
2. Ρυθμίστε το στατό ορού ② στο επιθυμητό ύψος και διορθώστε τη γωνία για κάθετη ευθυγράμμιση (γωνία 90° σε σχέση με το έδαφος).
3. Σφίξτε ξανά τον μοχλό ①.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στο στατό ορού

– Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ικανότητα αντοχής φορτίου των 4 kg (2 x 2 kg).


4.5 Φρένα χρήσης από βοηθό

Φρένα που χρησιμοποιούνται από βοηθό μπορούν προαιρετικά να εγκατασταθούν στη ράβδο ώθησης του αναπηρικού αμαξιδίου.




Πριν χρησιμοποιήσετε τα φρένα χρήσης από βοηθό, ανατρέξτε στις γενικές πληροφορίες για τα φρένα στο κεφάλαιο 3.4 *Φρένα στάθμευσης*, σελίδα 15.

Τα φρένα χρήσης από βοηθό πρέπει να εγκατασταθούν από τον προμηθευτή σας ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

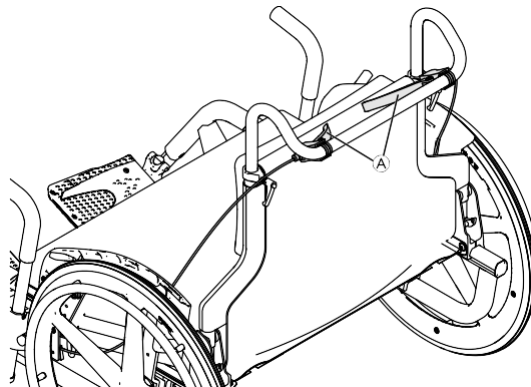

1. Τραβήξτε και κρατήστε τους μοχλούς φρένων ① για να συμπλέξετε τα φρένα.
2. Για να αποσυμπλέξετε τα φρένα, αφήστε τους μοχλούς φρένων.


4.6 Βάση στήριξης μπαστουνιού

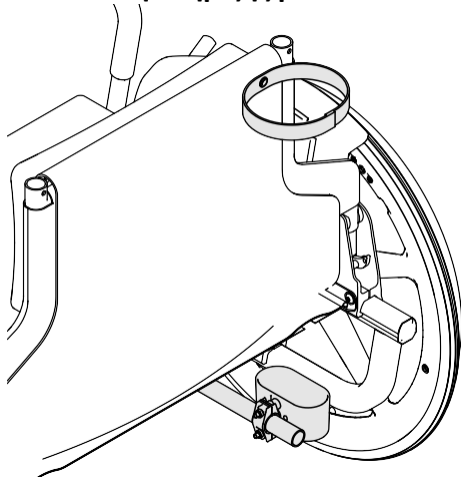

Μια βάση μπαστουνιού μπορεί προαιρετικά να εγκατασταθεί στο κάτω εγκάρσιο πλαίσιο και στην πλάτη του αναπηρικού αμαξιδίου.

Η βάση μπαστουνιού πρέπει να εγκατασταθεί από τον προμηθευτή σας ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

4.7 Βάση φιάλης οξυγόνου

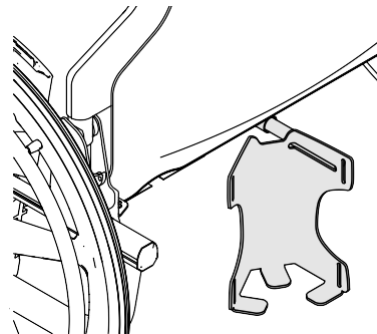

Προαιρετικά, στο αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να τοποθετηθεί μια βάση για φιάλη οξυγόνου.

Όταν επιλέγεται αυτή η επιλογή, στο παραδοτέο υλικό περιλαμβάνονται οδηγίες τοποθέτησης.

Η μέγιστη ικανότητα αντοχής φορτίου της βάσης φιάλης οξυγόνου είναι 5,6 kg.

5 Εγκατάσταση

5.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια

**ΠΡΟΣΟΧΗ!****Κίνδυνος τραυματισμού**

- Πριν χρησιμοποιήσετε το αναπηρικό αμαξίδιο, ελέγξτε τη γενική του κατάσταση και τις κύριες λειτουργίες του, βλ. 8.2 Χρονοδιάγραμμα συντήρησης, σελίδα 44.

Ο προμηθευτής σας θα σας παραδώσει το αναπηρικό αμαξίδιο έτοιμο για χρήση. Ο προμηθευτής σας θα σας εξηγήσει τις κύριες λειτουργίες και θα διασφαλίσει ότι το αναπηρικό αμαξίδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Όταν παραλαμβάνετε το αναπηρικό αμαξίδιο, ο άξονας του πίσω τροχού είναι πάντα τοποθετημένος στην πιο μπροστινή θέση. Για να καταστεί το αναπηρικό αμαξίδιο πιο σταθερό, ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πίσω σε δύο πιθανές θέσεις.

Οι ρυθμίσεις στη θέση του άξονα και στα ροδάκια πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.

5.2 Έλεγχος κατά την παραλαβή

Οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερθεί αμέσως στη μεταφορική εταιρεία. Ουμνηθείτε να φυλάξετε τη συσκευασία μέχρι η μεταφορική εταιρεία να ελέγξει τα εμπορεύματα και να ολοκληρωθεί ο διακανονισμός.

6 Χρήση

6.1 Πληροφορίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πτώσης από το αναπηρικό αμαξίδιο

Όταν χρησιμοποιούνται μικρά ροδάκια, το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να κολλήσει σε κράσπεδα ή σε αυλακώσεις του δαπέδου.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπροστινοί τροχοί είναι κατάλληλοι για την επιφάνεια στην οποία οδηγείτε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος επικίνδυνων καταστάσεων

– Μη χρησιμοποιείτε το αναπηρικό αμαξίδιο σε δημόσιους δρόμους.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος σύνθλιψης

Ενδέχεται να υπάρχει πολύ μικρό κενό ανάμεσα στον πίσω τροχό και τον λασπωτήρα, που ενέχει κίνδυνο παγίδευσης των δακτύλων σας.

– Διασφαλίστε ότι κινείτε πάντα το αναπηρικό σας αμαξίδιο χρησιμοποιώντας μόνο τις στεφάνες κύλισης χειρός



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ατυχημάτων

Το αναπηρικό αμαξίδιο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο από ένα άτομο.

– Βεβαιωθείτε ότι μόνο ένα άτομο κάθεται στο αναπηρικό αμαξίδιο.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος

– Μη χρησιμοποιείτε το αναπηρικό αμαξίδιο ως μηχανήμα άσκησης με βάρη.

6.2 Φρενάρισμα κατά τη χρήση

Όταν κινείστε, μπορείτε να φρενάρτε ασκώντας δύναμη στη στεφάνη κύλισης χειρός με τα χέρια σας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ανατροπής εάν φρενάρτε απότομα

Εάν ενεργοποιήσετε τα φρένα στάθμευσης ενώ κινείστε, η κατεύθυνση της κίνησης μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη και το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να σταματήσει απότομα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ή σε πτώση σας από το αμαξίδιο.

– Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα φρένα στάθμευσης ενώ κινείστε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ατυχήματος

Να χρησιμοποιείτε πάντα τα φρένα στάθμευσης για να ασφαλίσετε το αναπηρικό αμαξίδιο κατά τη διάρκεια σύντομων ή μεγάλων στάσεων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος πτώσης από το αναπηρικό αμαξίδιο**

Εάν ένας βοηθός τραβήξει τις λαβές ώθησης και το αναπηρικό αμαξίδιο επιβραδυνθεί απότομα, ο χρήστης μπορεί να πέσει από το αναπηρικό αμαξίδιο.

- Πάντα να φοράτε τη ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος, εάν υπάρχει.
- Να επιβραδύνετε χρησιμοποιώντας και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα και μην οδηγείτε σε κλίσεις που υπερβαίνουν τις 7°, ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε τον απόλυτο έλεγχο της διεύθυνσης του αναπηρικού αμαξιδίου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!****Κίνδυνος εγκαυμάτων στα χέρια σας**


Εάν φρενάρετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, παράγεται μεγάλη θερμότητα από την τριβή στις στεφάνες κύλισης χειρός (ειδικά στις αντιολισθητικές στεφάνες κύλισης χειρός).

- Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

1. Κρατήστε τις στεφάνες κύλισης χειρός και πιέστε ομοιόμορφα και με τα δύο χέρια μέχρι το αναπηρικό αμαξίδιο να σταματήσει.

Φρενάρισμα με βοηθό

Με ένα φρένο που χρησιμοποιείται από βοηθό, ένας βοηθός μπορεί να φρενάρει το αναπηρικό αμαξίδιο ενώ κινείται.

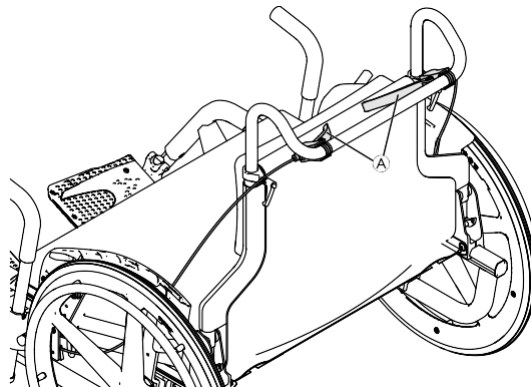

1. Για το να φρενάρετε, τραβήξτε και κρατήστε τους μοχλούς φρένων (A) στη ράβδο ώθησης.
2. Για να αποσυμπλέξετε τα φρένα, αφήστε τους μοχλούς φρένων.

6.3 Επιβίβαση και αποβίβαση από το αναπηρικό αμαξίδιο

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος ανατροπής**

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υπάρχει υψηλός κίνδυνος ανατροπής.

- Να κάθεστε και να σηκώνεστε χωρίς βοήθεια μόνο εάν είστε σωματικά ικανός/-ή για κάτι τέτοιο.
- Κατά τη μετάβασή σας, να τοποθετείτε το σώμα σας όσο το δυνατόν πιο μέσα στο κάθισμα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στην ταπετσαρία και η πιθανότητα το αναπηρικό αμαξίδιο να αναποδογυρίσει προς τα εμπρός.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο τροχίσκοι είναι στραμμένοι ευθεία προς τα εμπρός.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος ανατροπής**

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός αν σταθείτε στο πέλμα.

– Ποτέ μην στέκεστε στο πέλμα ενώ κάθεστε ή σηκώνεστε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**


Εάν τα φρένα απενεργοποιηθούν ή υποστούν ζημιά, το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να κυλήσει μακριά ανεξέλεγκτα.

– Μη στηρίζετε στα φρένα ενώ κάθεστε ή σηκώνεστε.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Τα προστατευτικά ρουχισμού μπορεί να υποστούν ζημιά.

– Ποτέ μην κάθεστε στα προστατευτικά ρουχισμού ενώ κάθεστε ή σηκώνεστε από το αμαξίδιο.

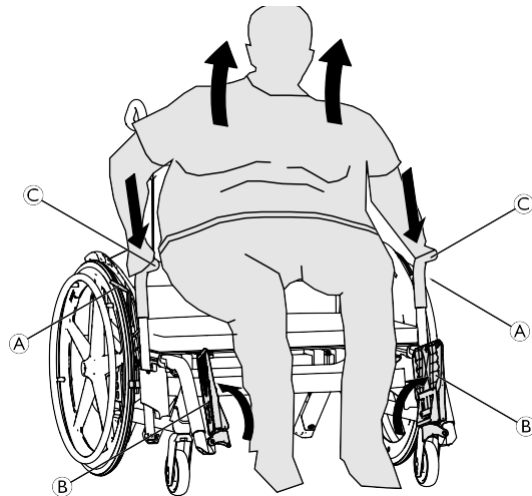

1. Βάλτε και τις δύο ασφάλειες των τροχών **A**.
2. Ανασηκώστε τα πέλματα **B** ή περιστρέψτε τα υποπόδια προς τα έξω.
3. Ακουμπήστε και τα δύο πόδια σας γερά στο έδαφος.
4. Στηριχτείτε και με τα δύο χέρια στα βοηθήματα μεταφοράς βοηθάει **C**.



Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές των βοηθημάτων μεταφοράς είναι στραμμένες προς τα εμπρός. Αυτό θα μειώσει την προσπάθεια που απαιτείται για να καθίσετε ή να σηκωθείτε από το αναπηρικό αμαξίδιο.

5. Σηκωθείτε αργά από το αναπηρικό αμαξίδιο.

6.4 Οδήγηση και διεύθυνση του αναπηρικού αμαξιδίου

Για να οδηγήσετε και να κατευθύνετε το αναπηρικό αμαξίδιο χρησιμοποιήστε τις στεφάνες κύλισης χειρός.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ανατροπής

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να ανατραπεί προς τα πίσω.

- Κατά τον εντοπισμό του σημείου κλίσης, ένας βοηθός πρέπει να στέκεται ακριβώς πίσω από το αναπηρικό αμαξίδιο για να το πιάσει σε περίπτωση ανατροπής του.
- Συνιστούμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας από ανατροπή για την αποφυγή ανατροπής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ανατροπής

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός.

Κατά την εγκατάσταση του αναπηρικού αμαξιδίου σας, δοκιμάστε τη συμπεριφορά του όσον αφορά την κλίση προς τα εμπρός και προσαρμόστε ανάλογα τον τρόπο οδήγησής σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ένα βαρύ φορτίο που κρέμεται στην πλάτη του αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να επηρεάσει το κέντρο βάρους του αναπηρικού αμαξιδίου. Προσαρμόστε ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο οδηγείτε.

Εύρεση του σημείου κλίσης με έναν βοηθό



Για να βρει ο χρήστης το σημείο κλίσης, ένας βοηθός μπορεί να γείρει το αναπηρικό αμαξίδιο προς τα πίσω χρησιμοποιώντας τη ράβδο ώθησης.

6.5 Διέλευση από σκαλοπάτια και κράσπεδα



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ατυχημάτων και ζημιών στο αναπηρικό αμαξίδιο

Όταν διασχίζετε σκαλοπάτια ή κράσπεδα, η συσκευή προστασίας από ανατροπή ή η τροχήλατη βάση μεταφοράς μπορεί να μαγκώσει και το αναπηρικό αμαξίδιο να ανατραπεί ή να προκληθούν ζημιές σε εξαρτήματα.

- Μην περνάτε από σκαλοπάτια και κράσπεδα όταν είναι εγκατεστημένη η συσκευή προστασίας από ανατροπή ή η τροχήλατη βάση μεταφοράς.

Χωρίς βοηθό

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος ανατροπής**

Όταν διέρχεστε από σκαλοπάτια, μπορεί να χάσετε την ισορροπία σας με αποτέλεσμα το αναπηρικό αμαξίδιο να ανατραπεί.

– Αξιολογήστε σωστά τη διέλευση του εμποδίου. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι θα περάσετε το εμπόδιο με ασφάλεια, σηκωθείτε από το αναπηρικό αμαξίδιο, μετακινήστε το με το χέρι σας πάνω από το εμπόδιο και στη συνέχεια συνεχίστε τη διαδρομή σας.

Με έναν βοηθό

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος τραυματισμού του βοηθού και ζημιάς στο αναπηρικό αμαξίδιο**

Η κλίση του αμαξιδίου όταν ο χρήστης είναι βαρύς μπορεί να τραυματίσει την πλάτη του βοηθού και να προκαλέσει ζημιά στο αμαξίδιο.

- Μη γέρνετε το αμαξίδιο όταν το βάρος του χρήστη είναι μεγαλύτερο από 150 κιλά.
- Πριν εκτελέσετε ελιγμό κλίσης, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ελέγξετε με ασφάλεια το αναπηρικό αμαξίδιο όταν ο χρήστης που κάθεται σε αυτό είναι βαρύς.


Κατεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι

1. Μετακινήστε το αναπηρικό αμαξίδιο ακριβώς μέχρι το κράσπεδο και πιάστε τις στεφάνες κύλισης χειρός.
2. Ο βοηθός πρέπει να κρατήσει τη ράβδο ώθησης και να γείρει το αναπηρικό αμαξίδιο προς τα πίσω, έτσι ώστε τα ροδάκια να ανασηκωθούν από το έδαφος.
3. Στη συνέχεια, ο βοηθός θα πρέπει να κρατήσει το αναπηρικό αμαξίδιο σε αυτή τη θέση, να το σπρώξει προσεκτικά για να κατέβει το σκαλοπάτι και στη συνέχεια να το γείρει προς τα εμπρός μέχρι τα ροδάκια να επιστρέψουν στο έδαφος.

Ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών**

Το συχνό ανεβοκατέβασμα σκαλοπατιών και πεζοδρομίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η πλάτη του αναπηρικού αμαξιδίου να σπάσει νωρίτερα από το αναμενόμενο λόγω κόπωσης του υλικού. Ο χρήστης μπορεί να πέσει από το αναπηρικό αμαξίδιο.

1. Μετακινήστε το αναπηρικό αμαξίδιο προς τα πίσω, μέχρι οι πίσω τροχοί να ακουμπήσουν στο κράσπεδο.
2. Ο βοηθός θα πρέπει να γείρει το αναπηρικό αμαξίδιο χρησιμοποιώντας και τις δύο λαβές ώθησης, έτσι ώστε τα ροδάκια να ανασηκωθούν από το έδαφος, και στη συνέχεια να τραβήξει τους πίσω τροχούς πάνω από το κράσπεδο μέχρι τα ροδάκια να μπορέσουν να ακουμπήσουν ξανά στο έδαφος.

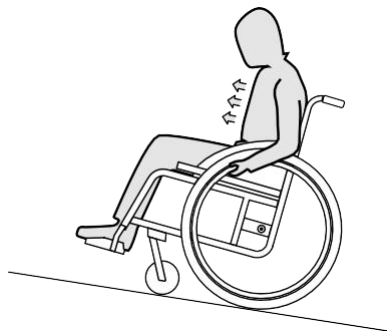

6.6 Διέλευση από ράμπες και επικλινείς δρόμους



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος λόγω μη ελέγχου του αναπηρικού αμαξιδίου Όταν διασχίζετε πλαγιές ή εδάφη με κλίση, το αναπηρικό σας αμαξίδιο μπορεί να ανατραπεί προς τα πίσω, προς τα εμπρός ή στο πλάι.

- Να έχετε πάντα έναν βοηθό πίσω από το αναπηρικό αμαξίδιο όταν πλησιάζετε μεγάλες πλαγιές.
- Αποφεύγετε τις πλευρικές κατωφέρειες.
- Αποφεύγετε δρόμους με κλίση άνω των 7°.
- Αποφεύγετε τις σπασμωδικές κινήσεις όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε πλαγιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το αναπηρικό σας αμαξίδιο μπορεί να απομακρυνθεί με ταχύτητα ακόμα και σε ελαφρώς επικλινές έδαφος, αν δεν το ελέγχετε χρησιμοποιώντας τις στεφάνες κύλισης χειρός.

Χρησιμοποιήστε τα φρένα στάθμευσης εάν το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ακινητοποιημένο σε επικλινές έδαφος.


1. Γείρετε το πάνω μέρος του σώματός σας προς τα εμπρός και προωθήστε το αναπηρικό αμαξίδιο με γρήγορες, δυναμικές κινήσεις και στις δύο στεφάνες κύλισης χειρός.

Κατάβαση πλαγιών

Όταν κατηφορίζετε πλαγιές, είναι σημαντικό να ελέγχετε την κατεύθυνσή σας και κυρίως την ταχύτητά σας.

Ανάβαση πλαγιών

Για να ανηφορίσετε μια πλαγιά, πρέπει να δημιουργήσετε κάποια ορμή, να διατηρήσετε την ορμή και ταυτόχρονα να ελέγχετε την κατεύθυνσή σας.

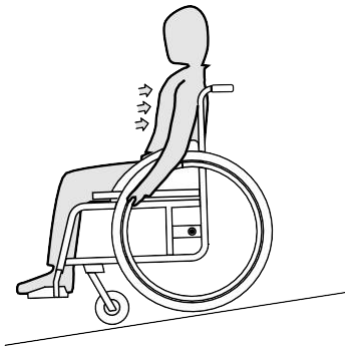

1. Γείρετε προς τα πίσω και αφήστε με προσοχή τις στεφάνες κύλισης χειρός να κυλήσουν μέσα από τα δάκτυλά σας. Θα πρέπει να μπορείτε να σταματήσετε το αναπηρικό αμαξίδιο ανά πάσα στιγμή πιάνοντας τις στεφάνες κύλισης χειρός.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!****Κίνδυνος εγκαυμάτων στα χέρια σας**

Εάν φρενάρετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, παράγεται μεγάλη θερμότητα από την τριβή στις στεφάνες κύλισης χειρός.

- Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

6.7 Σταθερότητα και ισορροπία όταν κάθεστε


Ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες και ενέργειες απαιτούν να σκύψετε προς τα εμπρός, στο πλάι ή προς τα πίσω από το αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στην ευστάθεια του αναπηρικού αμαξιδίου. Για να διατηρείτε διαρκώς την ισορροπία σας, προχωρήστε ως εξής:

Σκύψιμο προς τα εμπρός

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος πτώσης**

Αν σκύψετε μπροστά ενώ κάθεστε στο αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί να πέσετε από αυτό.

- Ποτέ μη σκύβετε πολύ μπροστά και μη μετατοπίζετε το σώμα σας προς τα εμπρός στο κάθισμά σας για να φτάσετε ένα αντικείμενο.
- Μη σκύβετε προς τα εμπρός ανάμεσα στα γόνατά σας για να πιάσετε κάτι από το δάπεδο.

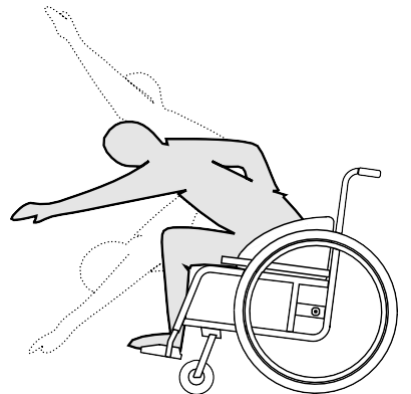

1. Στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς προς τα εμπρός. (Για να το κάνετε αυτό, μετακινήστε το αναπηρικό σας αμαξίδιο ελαφρώς προς τα εμπρός και μετά ξανά προς τα πίσω.)
2. Εφαρμόστε και τα δύο φρένα στάθμευσης.
3. Όταν σκύβετε προς τα εμπρός, το πάνω μέρος του σώματός σας πρέπει να παραμένει επάνω από τους μπροστινούς τροχούς.

Τέντωμα προς τα πίσω




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πτώσης

Εάν γείρετε το σώμα σας υπερβολικά προς τα πίσω, το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να ανατραπεί.

- Μη γέρνετε πίσω από την πλάτη.
- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή προστασίας από ανατροπή.

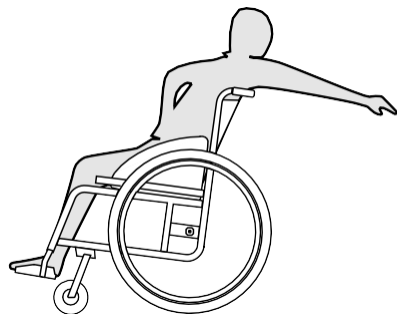

1. Στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς προς τα εμπρός. (Για να το κάνετε αυτό, μετακινήστε το αναπηρικό σας αμαξίδιο ελαφρώς προς τα εμπρός και μετά ξανά προς τα πίσω.)
2. Μην εφαρμόσετε τα φρένα στάθμευσης.
3. Όταν τεντώνετε προς τα πίσω, μην τεντωθείτε τόσο μακριά ώστε να χρειαστεί να μετακινηθείτε επάνω στο κάθισμά σας.

7 Μεταφορά

7.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού εάν το αναπηρικό αμαξίδιο δεν είναι σωστά ασφαλισμένο

Σε περίπτωση ατυχήματος, ελιγμού φρεναρίσματος κ.λπ., μπορεί να υποστείτε σοβαρούς τραυματισμούς από εκτοξευόμενα μέρη του αναπηρικού αμαξιδίου.

- Πάντα να αφαιρείτε τους πίσω τροχούς κατά τη μεταφορά του αναπηρικού αμαξιδίου.
- Ασφαλίστε καλά όλα τα εξαρτήματα του αναπηρικού αμαξιδίου στο μέσο μεταφοράς για να μη χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η υπερβολική φθορά και τριβή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντοχή των εξαρτημάτων που υποστηρίζουν το βάρος.

Μην τραβάτε το αναπηρικό σας αμαξίδιο πάνω σε τραχιές επιφάνειες χωρίς τους τροχούς (π.χ. τραβώντας τον σκελετό πάνω από στην άσφαλτο).

7.2 Τροχήλατη βάση μεταφοράς

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να εξοπλιστεί με τροχήλατη βάση μεταφοράς που μειώνει τις διαστάσεις για ευκολότερη μεταφορά και αποθήκευση.

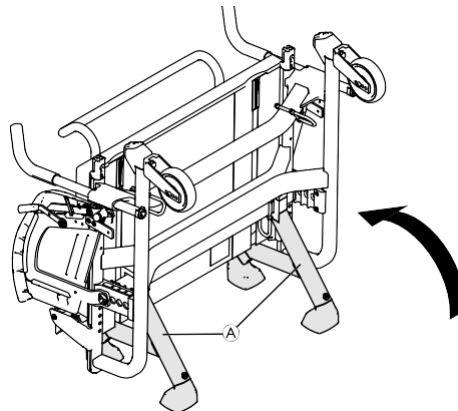


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιές στο αμαξίδιο

Η συσκευή προστασίας από ανατροπή ή η τροχήλατη βάση μεταφοράς μπορεί να σπάσει λόγω κόπωσης του υλικού όταν πατάτε πάνω της και ασκείτε δύναμη.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προστασίας από ανατροπή ή την τροχήλατη βάση μεταφοράς ως βοήθημα κλίσης.

1. Διπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς το κάθισμα μέχρι να ασφαλίσει με ένα ηχητικό «κλικ».
2. Σηκώστε το αναπηρικό αμαξίδιο και τοποθετήστε το στα ροδάκια της τροχήλατης βάσης μεταφοράς (A).

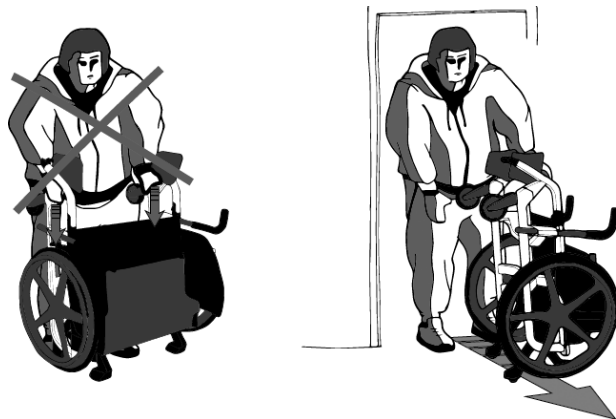
**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Η τροχήλατη βάση μεταφοράς προορίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά του αναπηρικού αμαξιδίου μέσω στενών πλαισίων θυρών, εισόδων ή παρόμοιων χώρων.

- Μη στηρίζετε το βάρος του σώματός σας στην τροχήλατη βάση μεταφοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε την τροχήλατη βάση μεταφοράς ως περπατητήρα.

7.3 Αφαίρεση και τοποθέτηση των πίσω τροχών**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος ανατροπής**

Εάν ο αφαιρούμενος άξονας ενός πίσω τροχού δεν έχει συμπλεχθεί πλήρως, ο τροχός μπορεί να χαλαρώσει κατά τη χρήση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι αφαιρούμενοι άξονες έχουν συμπλεχθεί πλήρως κάθε φορά που τοποθετείτε έναν τροχό.

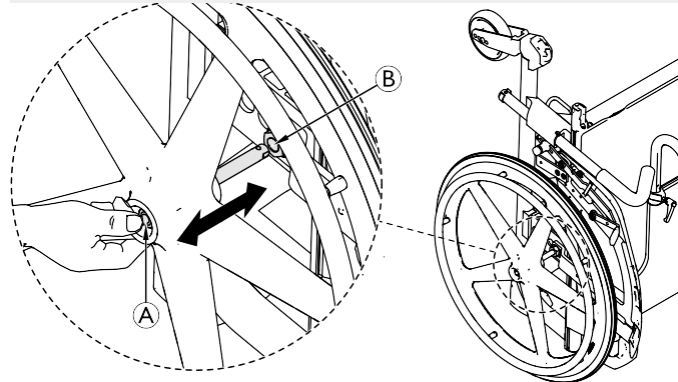**Αφαίρεση των πίσω τροχών**

1. Αποσυμπλέξτε τα φρένα στάθμευσης.
2. Κλείστε την πλάτη του καθίσματος, βλ. 3.5 Πλάτη καθίσματος, σελίδα 15.
3. Σηκώστε το αναπηρικό αμαξίδιο και γείρετέ το πάνω στην τροχήλατη βάση μεταφοράς, βλ. 7.2 Τροχήλατη βάση μεταφοράς, σελίδα 35.
4. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας, πατήστε το κουμπί (A) του αφαιρούμενου άξονα. Συνεχίστε να το πιέζετε και αφαιρέστε τον τροχό τραβώντας τον από το περίβλημα προσαρμογέα (B).

Τοποθέτηση των πίσω τροχών


1. Κρατήστε τον τροχό στην πλήμνη του τροχού.
2. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας, πιέστε το κουμπί (A) του αφαιρούμενου άξονα και κρατήστε το πατημένο.
3. Σπρώξτε τον άξονα μέσα στο περίβλημα προσαρμογέα (B) μέχρι να σταματήσει.
4. Αφήστε το κουμπί του αφαιρούμενου άξονα και βεβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.
5. Γείρετε το αναπηρικό αμαξίδιο στους πίσω τροχούς και στα ροδάκια.
6. Ανοίξτε την πλάτη.

7.4 Πώς να ανασηκώσετε το αναπηρικό αμαξίδιο



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ποτέ μην ανασηκώνετε το αναπηρικό αμαξίδιο από τα αφαιρούμενα μέρη (βοήθημα μεταφοράς, πατάκια).
- Βεβαιωθείτε ότι οι στύλοι της πλάτης του καθίσματος είναι τοποθετημένοι με ασφάλεια στη θέση τους.

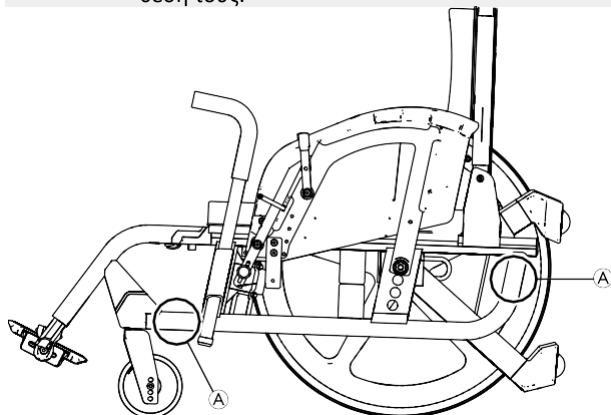

1. Διπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς τα κάτω, εάν είναι απαραίτητο, βλ. 3.5 Πλάτη καθίσματος, σελίδα 15.
2. Πάντα να σηκώνετε το αναπηρικό αμαξίδιο κρατώντας το από το πλαίσιο στα σημεία A.

Για να μεταφέρετε το πλαίσιο όταν το αναπηρικό αμαξίδιο είναι αποσυναρμολογημένο, μπορείτε επίσης να κρατήσετε το πλαίσιο από τα σημεία (A).

7.5 Μεταφορά του χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου χωρίς τον χρήστη του καθισμένο



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού

Εάν δεν μπορείτε να στερεώσετε με ασφάλεια αυτό το βοήθημα κινητικότητας σε όχημα μεταφοράς, η Invacare συνιστά να μην το μεταφέρετε.

Το χειροκίνητο αναπηρικό σας αμαξίδιο μπορεί να μεταφερθεί χωρίς περιορισμούς, είτε οδικώς, είτε σιδηροδρομικώς είτε αεροπορικώς. Ωστόσο, η κάθε μεταφορική εταιρεία έχει κατευθυντήριες γραμμές που ενδεχομένως να περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισμένες διαδικασίες μεταφοράς. Ρωτήστε τη μεταφορική εταιρεία σε κάθε επιμέρους περίπτωση.

- Η Invacare συνιστά θερμά τη στερέωση του χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου στο δάπεδο του οχήματος μεταφοράς.

7.6 Μεταφορά του αναπηρικού αμαξιδίου σε όχημα μαζί με τον χρήστη του καθισμένο

Ακόμα και όταν το αναπηρικό αμαξίδιο είναι σωστά ασφαλισμένο και τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί στους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομης στάσης. Για τον λόγο αυτό, η Invacare συνιστά θερμά ο χρήστης του αναπηρικού αμαξιδίου να μεταφέρεται στο κάθισμα του οχήματος φορώντας τη ζώνη ασφαλείας. Μην κάνετε τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις σε σημεία του αναπηρικού αμαξιδίου (σκελετός, πλαίσιο ή μέρη) χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Invacare Corporation. Το αναπηρικό αμαξίδιο έχει υποβληθεί με επιτυχία σε ελέγχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 7176-19 (Μετωπική σύγκρουση).

Για τη μεταφορά του αναπηρικού αμαξιδίου μαζί με τον χρήστη σε όχημα, πρέπει να εγκατασταθεί στο όχημα ένα σύστημα συγκράτησης. Τα στοιχεία πρόσδεσης και τα συστήματα συγκράτησης χρήστη πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με το ISO 10542-1. Επικοινωνήστε με τον διανομέα της Invacare ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός εγκεκριμένου και συμβατού συστήματος συγκράτησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ατυχημάτων

- Κίνδυνος ατυχημάτων λόγω χρήσης ανεπαρκούς συστήματος συγκράτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συγκράτησης έχει σχεδιαστεί για το βάρος του χρήστη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εάν, για κάποιο λόγο, είναι αδύνατη η μεταφορά του χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου σε κάθισμα οχήματος, το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα σε όχημα, εφόσον τηρηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες και κανονισμοί. Ένα κιτ μεταφοράς (προαιρετικό) πρέπει να τοποθετηθεί στο αμαξίδιο για τον σκοπό αυτό.

- Το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να στερεωθεί στο όχημα με ένα σύστημα συγκράτησης 4 σημείων.
- Ο χρήστης πρέπει να φοράει ένα σύστημα συγκράτησης επιβατών 3 σημείων στερεωμένο στο όχημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα αναπηρικά αμαξίδια έχουν υποβληθεί σε δοκιμές πρόσκρουσης σύμφωνα με το ISO 7176-19, για προσομοίωση της συμπεριφοράς τους όταν χρησιμοποιούνται ως καθίσματα στραμμένα προς τα εμπρός σε μηχανοκίνητα οχήματα από παιδιά και ενήλικες με μάζα σώματος ίση με ή μεγαλύτερη από 22 kg.

- Μη χρησιμοποιείτε το αναπηρικό αμαξίδιο ως κάθισμα σε όχημα όταν το βάρος του χρήστη είναι μικρότερο από 22 kg.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη μεταφορά, επικοινωνήστε με τον μεταφορέα και ζητήστε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εξασφάλισης του παρακάτω απαιτούμενου εξοπλισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το αναπηρικό αμαξίδιο και τον χρήστη, ώστε να αποφευχθεί η επαφή του χρήστη με άλλους επιβάτες του οχήματος, με μέρη του οχήματος χωρίς επένδυση, με αξεσουάρ του αναπηρικού αμαξιδίου ή με σημεία αγκύρωσης του συστήματος συγκράτησης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία πρόσδεσης στο αναπηρικό αμαξίδιο δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι τα φρένα στάθμευσης είναι πλήρως λειτουργικά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά σε περίπτωση που εξαρτήματα ή αξεσουάρ του αναπηρικού αμαξιδίου χαλαρώσουν εξαιτίας σύγκρουσης ή απότομης στάσης.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αφαιρούμενα ή αποσπώμενα εξαρτήματα και αξεσουάρ έχουν αφαιρεθεί από το αναπηρικό αμαξίδιο και έχουν αποθηκευτεί με ασφάλεια στο όχημα.
- Αποσυνδέστε το χειριστήριο από την υποδοχή σύνδεσής του στο κουτί ελέγχου και φυλάξτε το με ασφάλεια στο όχημα (μόνο στην ηλεκτρική έκδοση).
- Είναι απαραίτητο να ζητήσετε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να ελέγξει το αναπηρικό σας αμαξίδιο μετά από ατύχημα, σύγκρουση, ή απότομη ακινητοποίηση.

Ράμπες και επικλινείς δρόμοι:**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Κίνδυνος τραυματισμού**

Κίνδυνος εάν χαθεί ο έλεγχος του αναπηρικού αμαξιδίου

- Μην αφήνετε ποτέ τον χρήστη χωρίς επίβλεψη κατά τη μεταφορά του αναπηρικού αμαξιδίου σε ράμπες ή επικλινείς δρόμους.




Για τον λόγο αυτό, η Invacare συνιστά ο χρήστης του αναπηρικού αμαξιδίου να μεταφέρεται στο όχημα φορώντας τη ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης που παρέχονται με τα συστήματα συγκράτησης.
- Οι ακόλουθες εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή του συστήματος συγκράτησης.



Η επιλογή της διαμόρφωσης του αναπηρικού αμαξιδίου (πλάτος και βάθος καθίσματος, μεταξόνιο) επηρεάζει την ευκολία ελιγμών και την πρόσβαση σε μηχανοκίνητα οχήματα.

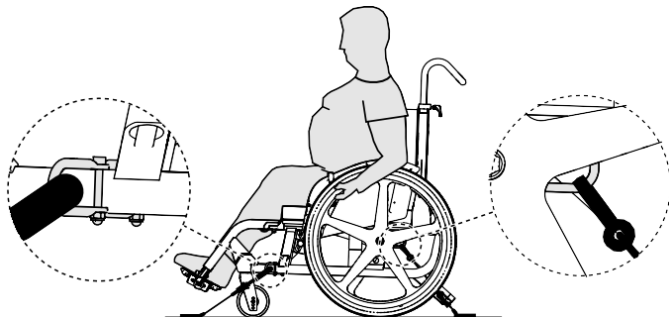Ασφάλιση του αναπηρικού αμαξιδίου με σύστημα συγκράτησης 4 σημείων**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**


- Τοποθετήστε το αναπηρικό αμαξίδιο με τον χρήστη στραμμένο προς τα εμπρός, προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
- Ενεργοποιήστε τα φρένα στάθμευσης.

Οι θέσεις πρόσδεσης του αναπηρικού αμαξιδίου όπου πρέπει να τοποθετηθούν οι μάντες του συστήματος συγκράτησης επισημαίνονται με σύμβολα γάντζων τύπου καραμπίνερ (βλ. τις

ακόλουθες εικόνες και την ενότητα 2.3 *Ετικέτες και σύμβολα στο προϊόν, σελίδα 10*).


1. Χρησιμοποιώντας τους μπροστινούς και πίσω ιμάντες του συστήματος συγκράτησης 4 σημείων, ασφαλίστε το αναπηρικό αμαξίδιο στις ράγες που είναι στο όχημα. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης που παρέχονται με το σύστημα συγκράτησης 4 σημείων.

Θέσεις πρόσδεσης για τους ιμάντες στην μπροστινή πλευρά:

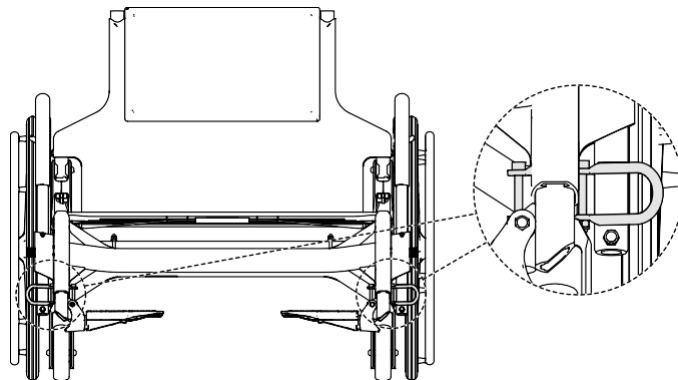

1. Περάστε τους μπροστινούς ιμάντες από τις θηλιές **A** του κιτ μεταφοράς και στις δύο πλευρές (δείτε τη θέση των ετικετών προσάρτησης).
2. Στερεώστε τους μπροστινούς ιμάντες στο σύστημα ραγών, ανατρέχοντας στις συνιστώμενες οδηγίες βέλτιστης πρακτικής που παρέχει ο κατασκευαστής της ζώνης ασφαλείας.
3. Αποδεσμεύστε τα φρένα στάθμευσης και τεντώστε τους μπροστινούς ιμάντες τραβώντας το αναπηρικό αμαξίδιο προς τα πίσω από το πίσω μέρος.
4. Εφαρμόστε τα φρένα στάθμευσης.

Πίσω θέσεις πρόσδεσης για γάντζους τύπου καραμπίνερ:

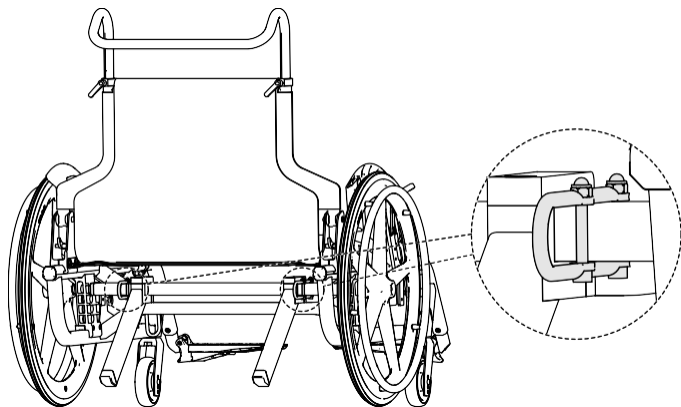


1. Περάστε τους γάντζους τύπου καραμπίνερ στις θηλές του κιτ μεταφοράς και στις δύο πλευρές (δείτε τη θέση των ετικετών προσάρτησης).
2. Στερεώστε τους πίσω ιμάντες στο σύστημα ραγών, ανατρέχοντας στις συνιστώμενες οδηγίες βέλτιστης πρακτικής που παρέχει ο κατασκευαστής της ζώνης ασφαλείας.
3. Σφίξτε τους ιμάντες.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Ελέγξτε αν οι πείροι είναι πλήρως ασφαλισμένοι και στις δύο πλευρές και βρίσκονται στην ίδια θέση με το διανοιγμένο τμήμα της ράγας.
- Βεβαιωθείτε ότι η γωνία ανάμεσα στις ράγες και τους ιμάντες είναι μεταξύ 40° και 45°.

Τοποθέτηση του συστήματος συγκράτησης επιβατών 3 σημείων

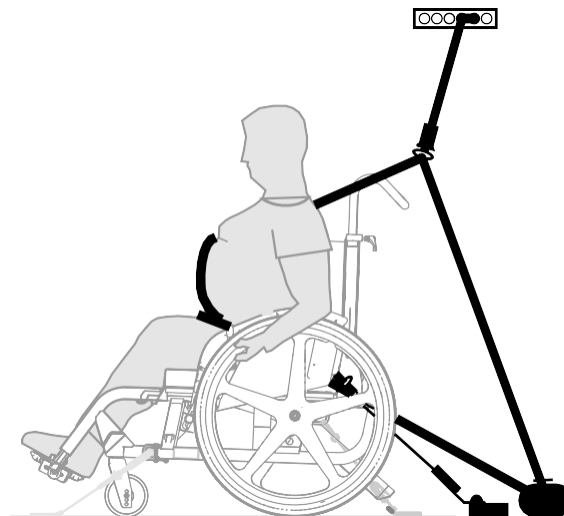

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η παραπάνω εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον προμηθευτή του συστήματος συγκράτησης.

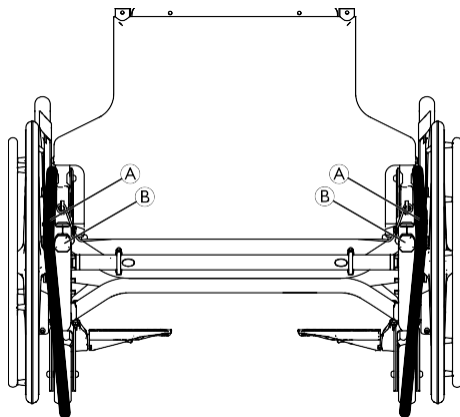

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι οι πίσω ζώνες συγκράτησης 3 σημείων **A** οδηγούνται στο εξωτερικό του πλαισίου **B**.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συγκράτησης επιβατών 3 σημείων εφαρμόζει όσο το δυνατόν πιο σφιχτά στο σώμα του χρήστη χωρίς να προκαλεί ενόχληση και ότι κανένα μέρος του δεν έχει συστραφεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συγκράτησης επιβατών 3 σημείων δεν διατηρείται σε απόσταση από το σώμα του χρήστη εξαιτίας παρεμβαλλόμενων μερών του αναπηρικού αμαξιδίου, όπως υποβραχιόνια ή τροχοί κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συγκράτησης του χρήστη ακολουθεί μια καθαρή πορεία από τον χρήστη έως το σημείο αγκύρωσης, χωρίς να παρεμβάλλεται κανένα μέρος του οχήματος, του αναπηρικού αμαξιδίου ή του καθίσματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη πυέλου εφαρμόζει σφιχτά πάνω από την πύελο του χρήστη χωρίς να μπορεί να ανέβει στην κοιλιακή χώρα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης μπορεί να φτάσει τον μηχανισμό απελευθέρωσης χωρίς βοήθεια.



1. Τοποθετήστε το σύστημα συγκράτησης επιβατών 3 σημείων σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σύστημα συγκράτησης επιβατών 3 σημείων που προμηθευτήκατε.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Φορέστε τη ζώνη συγκράτησης πυέλου του συστήματος ζώνης συγκράτησης 3 σημείων χαμηλά κατά μήκος της πυέλου, έτσι ώστε η γωνία της ζώνης πυέλου να βρίσκεται εντός της προτιμώμενης ζώνης (A), δηλαδή 30° έως 75° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Μια πιο κλειστή γωνία είναι καλύτερη, αλλά η γωνία δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τις 75°.

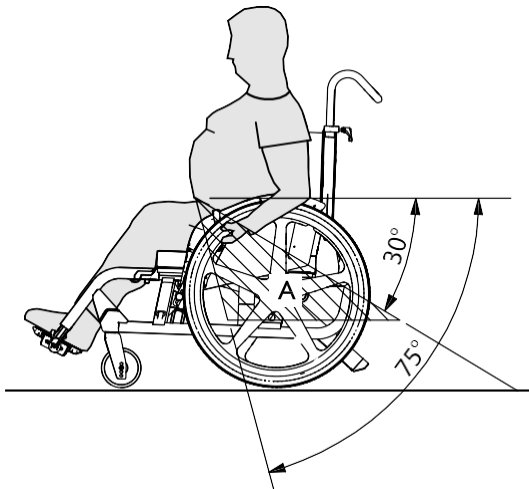

8 Συντήρηση

8.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ορισμένα υλικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του αναπηρικού αμαξιδίου.

Το αναπηρικό σας αμαξίδιο θα πρέπει να ελέγχεται από εξειδικευμένο τεχνικό τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Συσκευασία για επιστροφή

Το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να αποστέλλεται στον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή σε κατάλληλη συσκευασία για την αποφυγή ζημιάς κατά την αποστολή.

8.2 Χρονοδιάγραμμα συντήρησης

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία, πραγματοποιείτε τακτικά τους ακόλουθους οπτικούς ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης ή αναθέστε την εκτέλεσή τους σε άλλο άτομο.

	εβδομαδιαίως	μηνιαίως	ετησίως
Ελέγξτε αν οι πίσω τροχοί πατάνε σωστά	x		
Ελέγξτε τη ρύθμιση της άρθρωσης της πλάτης του καθίσματος	x		
Ελέγξτε τη ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος	x		

	εβδομαδιαίως	μηνιαίως	ετησίως
Ελέγξτε τα ροδάκια και αν είναι καλά τοποθετημένα		x	
Ελέγξτε τα σφαιρικά ροδάκια (τροχήλατη βάση μεταφοράς)		x	
Ελέγξτε τα μπουλόνια		x	
Ελέγξτε τα φρένα στάθμευσης		x	
Ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό να ελέγξει το αναπηρικό αμαξίδιο			x

Γενικός οπτικός έλεγχος

- Ελέγξτε το αναπηρικό αμαξίδιο για χαλαρά μέρη, ραγίσματα ή άλλα ελαττώματα.
- Εάν βρείτε οτιδήποτε, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το αναπηρικό σας αμαξίδιο και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο προμηθευτή.

Ελέγξτε αν οι πίσω τροχοί πατάνε σωστά

- Τραβήξτε τον πίσω τροχό για να ελέγξετε ότι ο αφαιρούμενος άξονας έχει τοποθετηθεί σωστά. Ο τροχός δεν θα πρέπει να βγαίνει από τη θέση του.
- Εάν οι πίσω τροχοί δεν συμπλέκονται σωστά, καθαρίστε τυχόν ρύπους ή εναποθέσεις ακαθαρσιών. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να επανατοποθετήσει τους αφαιρούμενους άξονες.

Ελέγξτε τη ρύθμιση της άρθρωσης της πλάτης του καθίσματος

1. Καθίστε στο αναπηρικό αμαξίδιο και γείρετε πίσω στην πλάτη του καθίσματος. Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη.
2. Τραβήξτε το καλώδιο απασφάλισης. Οι πείροι πρέπει να κινούνται ελεύθερα και στις δύο πλευρές. Διαφορετικά, η άρθρωση της πλάτης του καθίσματος θα πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Ελέγξτε τη ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος


1. Ελέγξτε αν η ζώνη υποστήριξης της στάσης του σώματος είναι σωστά ρυθμισμένη.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Οι χαλαρές ζώνες υποστήριξης του σώματος πρέπει να ρυθμίζονται από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή.
- Οι ζώνες υποστήριξης της στάσης του σώματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Ελέγξτε τα ροδάκια και αν είναι καλά τοποθετημένα

1. Ελέγξτε αν οι τροχίσκοι περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Πιέστε και τραβήξτε προς τις 3 κατευθύνσεις (μπροστά και πίσω, αριστερά και δεξιά, επάνω και κάτω) για να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει τζόγος και ελεύθερη κίνηση, ελέγξτε επίσης μήπως υπάρχει εμφανής ζημιά.

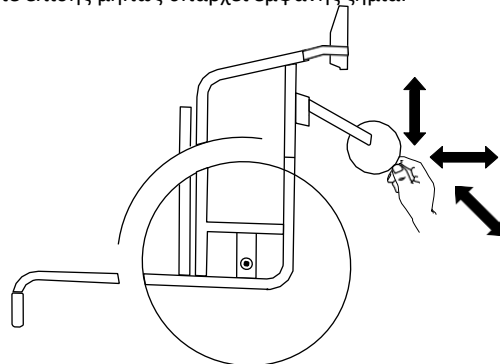*Σχήμα 8-1*

3. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους ή τρίχες από τα ρουλεμάν στα ροδάκια.
4. Τα ελαττωματικά ή φθαρμένα στηρίγματα στα ροδάκια πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Ελέγξτε τα σφαιρικά ροδάκια (τροχήλατη βάση μεταφοράς)

1. Ελέγξτε αν τα σφαιρικά ροδάκια περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους ή τρίχες από τα σφαιρικά ροδάκια.
3. Τα ελαττωματικά ή φθαρμένα σφαιρικά ροδάκια πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Ελέγξτε τα μπουλόνια

Τα μπουλόνια μπορεί να χαλαρώσουν λόγω της συνεχούς χρήσης.

1. Ελέγξτε αν τα μπουλόνια είναι καλά σφιγμένα και χωρίς τζόγο (στο πατάκι, στο κάλυμμα του καθίσματος, στα πλαϊνά, στην πλάτη, στο πλαίσιο και στη μονάδα του καθίσματος).
2. Σφίξτε τυχόν χαλαρά μπουλόνια με την κατάλληλη ροπή σύσφιξης όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο σέρβις. Μπορείτε να προμηθευτείτε εγχειρίδια σέρβις από την Invacare.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σε πολλές συνδέσεις χρησιμοποιούνται αυτασφαλιζόμενες βίδες/παξιμάδια ή η κόλλα ασφάλισης σπειρωμάτων. Εάν χαλαρώσουν, πρέπει να αντικατασταθούν με νέες αυτασφαλιζόμενες βίδες/παξιμάδια ή πρέπει να στερεωθούν με νέα κόλλα ασφάλισης σπειρωμάτων.
– Οι αυτοασφαλιζόμενες βίδες/τα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Ελέγξτε τα φρένα στάθμευσης

1. Ελέγξτε αν τα φρένα στάθμευσης είναι σωστά τοποθετημένα. Το φρένο στάθμευσης είναι στη σωστή θέση, εάν η σιαγόνα του φρένου πιέζει το ελαστικό κατά μερικά χιλιοστά όταν το φρένο στάθμευσης είναι συμπλεγμένο.
2. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν είναι σωστά ρυθμισμένα, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να ρυθμίσει σωστά τα φρένα στάθμευσης.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα φρένα στάθμευσης πρέπει να επαναρυθμιστούν μετά την αντικατάσταση των πίσω τροχών ή την αλλαγή της θέσης τους.

Έλεγχος μετά από δυνατή σύγκρουση ή χτύπημα



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μετά από δυνατή σύγκρουση ή ισχυρό χτύπημα, το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να υποστεί ζημιά που δεν εντοπίζεται με το μάτι.
– Είναι απαραίτητο να ζητήσετε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να ελέγξει το αναπηρικό σας αμαξίδιο μετά από μια δυνατή σύγκρουση ή ένα ισχυρό χτύπημα.

Ανταλλακτικά



Όλα τα ανταλλακτικά μπορούν να αγοραστούν από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της Invacare.

8.3 Καθαρισμός και απολύμανση

8.3.1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος μόλυνσης

– Λαμβάνετε προφυλάξεις για τον εαυτό σας και χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Λανθασμένα υγρά ή μέθοδοι μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή φθορά στο προϊόν.

- Όλα τα καθαριστικά και απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αποτελεσματικά, συμβατά μεταξύ τους και πρέπει να προστατεύουν τα υλικά για τα οποία χρησιμοποιούνται.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά υγρά (αλκαλικά, οξέα κ.λπ.) ή αποξεστικά καθαριστικά μέσα. Προτείνουμε τη χρήση κανονικού οικιακού καθαριστικού μέσου, όπως υγρό για το πλύσιμο των πιάτων, εάν δεν ορίζεται άλλως στις οδηγίες καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες (αραιωτικά κυτταρίνης, ακετόνη κ.λπ.) που αλλάζουν τη δομή του πλαστικού ή διαλύουν τις τοποθετημένες ετικέτες.
- Φροντίζετε πάντα το προϊόν να είναι πλήρως στεγνό προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.



Για καθαρισμό και απολύμανση σε κλινικό περιβάλλον ή περιβάλλον μακροχρόνιας φροντίδας, τηρείτε τις εσωτερικές διαδικασίες.

8.3.2 Διαστήματα καθαρισμού**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ο τακτικός καθαρισμός και η τακτική απολύμανση εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία, αυξάνουν τη διάρκεια λειτουργικής ζωής του προϊόντος και συμβάλλουν στην αποφυγή μολύνσεων.

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το προϊόν:

- τακτικά ενώ το χρησιμοποιείτε,
- πριν και μετά από κάθε διαδικασία συντήρησης,
- όταν έχει έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά,
- πριν από τη χρήση σε νέο χρήστη.

8.3.3 Καθαρισμός**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

– Το προϊόν δεν ενδείκνυται για καθαρισμό σε αυτόματα συστήματα πλύσης, με εξοπλισμό καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με ατμό.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Η σκόνη, η άμμος και το θαλασσινό νερό μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ρουλεμάν, και τα χαλύβδινα μέρη μπορεί να σκουριάσουν εάν η επιφάνειά τους φθαρεί.

- Να εκθέτετε το αναπηρικό αμαξίδιο σε άμμο και θαλασσινό νερό μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα και να το καθαρίζετε μετά από κάθε βόλτα στην παραλία.
- Εάν το αναπηρικό αμαξίδιο λερωθεί, σκουπίστε τους ρύπους το συντομότερο δυνατό με ένα νωπό πανί και στεγνώστε το προσεκτικά.

1. Αφαιρέστε τυχόν εγκατεστημένο προαιρετικό εξοπλισμό (μόνο προαιρετικό εξοπλισμό που δεν απαιτεί εργασία).
2. Σκουπίστε όλα τα μέρη χρησιμοποιώντας πανί ή μαλακή βούρτσα, κοινά οικιακά καθαριστικά (pH = 6 – 8) και ζεστό νερό.
3. Ξεπλύνετε τα μέρη με ζεστό νερό.
4. Στεγνώστε καλά τα μέρη με ένα στεγνό πανί.



Στις βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυαλιστικό αυτοκινήτων και μαλακό κερί αυτοκινήτων για την αφαίρεση γρατσουνιών και την αποκατάσταση της γυαλάδας.

Καθαρισμός της ταπετσαρίας

Για τον καθαρισμό της ταπετσαρίας ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες του καθίσματος, του μαξιλαριού και του καλύμματος της πλάτης.



Εάν είναι εφικτό, πριν το πλύσιμο να κλείνετε πάντα τις ταινίες τύπου velcro (χριτς χρατς) (τα αυτοσυγκρατούμενα μέρη) έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται πλήρως, για να ελαχιστοποιήσετε τη συσσώρευση χνουδιών και κλωστών στις ταινίες velcro και να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στο ύφασμα της ταπετσαρίας από αυτές.

8.3.4 Απολύμανση

Το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να απολυμανθεί με ψεκασμό ή σκούπισμα με ελεγμένα, εγκεκριμένα απολυμαντικά.



Ψεκάστε ένα απαλό καθαριστικό και απολυμαντικό προϊόν (βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο που πληροί τα πρότυπα EN1040 / EN1276 / EN1650) και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίδονται από τον κατασκευαστή.

1. Σκουπίστε όλες τις γενικά προσβάσιμες επιφάνειες με ένα μαλακό πανί και κοινό οικιακό απολυμαντικό.
2. Αφήστε το προϊόν να κρύνει στον αέρα.

9 Μετά τη χρήση

9.1 Αποθήκευση



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος

- Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ άλλα αντικείμενα πάνω στο αναπηρικό αμαξίδιο.
- Να αποθηκεύετε το αναπηρικό αμαξίδιο σε εσωτερικό χώρο, σε ξηρό περιβάλλον.
- Συμβουλευτείτε τα όρια θερμοκρασίας στο κεφάλαιο 11 *Τεχνικά στοιχεία*, σελίδα 52.



Για ασφαλή τοποθέτηση, το αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να αποθηκευτεί στηριζόμενο στην τροχήλατη βάση μεταφοράς, βλ. 7.2 *Τροχήλατη βάση μεταφοράς*, σελίδα 35.

Μετά από αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από τέσσερις μήνες), το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 *Συντήρηση*, σελίδα 44.

9.2 Αποκατάσταση

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση. Για αποκατάσταση του προϊόντος για νέο χρήστη, εκτελέστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- Έλεγχος
- Καθαρισμός και απολύμανση
- Προσαρμογή στις ανάγκες του νέου χρήστη

Για λεπτομερείς πληροφορίες, βλ. 8 *Συντήρηση*, σελίδα 44 και το εγχειρίδιο σέρβις αυτού του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι παραδίδεται και το εγχειρίδιο χρήσης μαζί με το προϊόν.

Σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης ή δυσλειτουργίας, μην επαναχρησιμοποιήσετε το προϊόν.

9.3 Απόρριψη

Επιδείξτε περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και ανακυκλώστε αυτό το προϊόν μέσω της μονάδας ανακύκλωσής σας στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

Αποσυναρμολογήστε το προϊόν και τα εξαρτήματά του, έτσι ώστε τα διαφορετικά υλικά να μπορούν να διαχωριστούν και να ανακυκλωθούν μεμονωμένα.

Η απόρριψη και ανακύκλωση των μεταχειρισμένων προϊόντων και της συσκευασίας πρέπει να εκτελούνται σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη διαχείριση απορριμμάτων κάθε χώρας. Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων για πληροφορίες.

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

10.1 Πληροφορίες για την ασφάλεια

Σφάλματα ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της καθημερινής χρήσης, των προσαρμογών ή των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων στο αναπηρικό αμαξίδιο. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε τα σφάλματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξειδικευμένο τεχνικό εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα στο αναπηρικό σας αμαξίδιο, για παράδειγμα, μια σημαντική αλλαγή στον χειρισμό.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Ορισμένες από τις αναγραφόμενες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο τεχνικό. Αυτές επισημαίνονται. Συνιστούμε

10.2 Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Το αναπηρικό αμαξίδιο δεν προχωράει σε ευθεία γραμμή	Τα ροδάκια δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα	Διορθώστε τη θέση και την ευθυγράμμιση στα ροδάκια, → εξειδικευμένος τεχνικός
	Τα ρουλεμάν στα ροδάκια είναι λερωμένα ή χαλασμένα	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ρουλεμάν, → εξειδικευμένος τεχνικός
	Οι πίσω τροχοί είναι εκτός τροχιάς	Αντικαταστήστε την τροχιά, → εξειδικευμένος τεχνικός
	Τα ροδάκια δεν είναι ρυθμισμένα στο ίδιο ύψος	Τοποθετήστε τα ροδάκια έτσι ώστε να ακουμπούν στο δάπεδο ταυτόχρονα, → εξειδικευμένος τεχνικός
Οι αφαιρούμενοι άξονες δεν εισάγονται σωστά	Οι αφαιρούμενοι άξονες είναι λερωμένοι	Καθαρίστε τους αφαιρούμενους άξονες
	Οι αφαιρούμενοι άξονες δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι	Ρυθμίστε τους αφαιρούμενους άξονες, → εξειδικευμένος τεχνικός
Τα φρένα στάθμευσης δεν ακινητοποιούν το αμαξίδιο σωστά ή ενεργοποιούνται ασύμμετρα	Λανθασμένη ρύθμιση φρένου	Διορθώστε τη ρύθμιση του φρένου, → εξειδικευμένος τεχνικός
Η αντίσταση στην κύλιση είναι πολύ υψηλή	Οι πίσω τροχοί δεν είναι παράλληλοι	Διορθώστε τους πίσω τροχούς ώστε να είναι παράλληλοι, → εξειδικευμένος τεχνικός
Τα ροδάκια ταλαντεύονται όταν το αμαξίδιο κινείται γρήγορα	Πολύ μικρή τάση στο έδρανο κύλισης των τροχίσκων	Σφίξτε ελαφρώς το παξιμάδι στον άξονα του εδράνου κύλισης, → εξειδικευμένος τεχνικός
	Τα ροδάκια έχουν λειανθεί λόγω φθοράς	Αντικαταστήστε τα ροδάκια, → εξειδικευμένος τεχνικός
Το ροδάκι είναι σκληρό ή κολλάει	Τα ρουλεμάν είναι λερωμένα ή χαλασμένα	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ρουλεμάν, → εξειδικευμένος τεχνικός

11 Τεχνικά στοιχεία

11.1 Διαστάσεις και βάρος

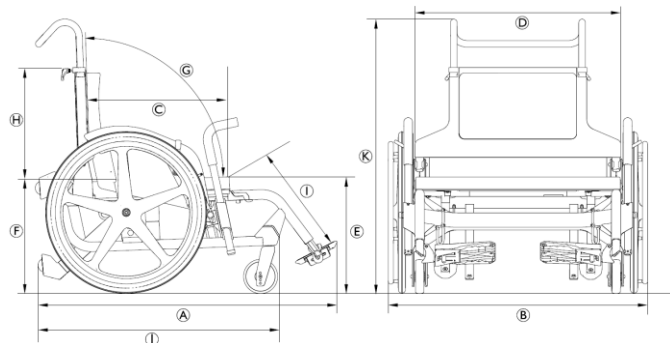

Όλες οι προδιαγραφές διαστάσεων και βάρους αναφέρονται σε μια ευρεία κλίμακα του αναπηρικού αμαξιδίου με την τυπική διαμόρφωση. Οι διαστάσεις και το βάρος (βάσει του ISO 7176-1/5/7) μπορεί να αλλάζουν σύμφωνα με τις διάφορες διαμορφώσεις. Σε ορισμένες διαμορφώσεις, το αναπηρικό αμαξίδιο υπερβαίνει τις συνιστώμενες διαστάσεις για ένα αναπηρικό αμαξίδιο.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Σε ορισμένες διαμορφώσεις, οι συνολικές διαστάσεις του αναπηρικού αμαξιδίου όταν είναι έτοιμο για χρήση υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια και η πρόσβαση σε οδούς διαφυγής έκτακτης ανάγκης δεν είναι δυνατή.
- Σε ορισμένες διαμορφώσεις, το αναπηρικό αμαξίδιο υπερβαίνει το συνιστώμενο μέγεθος για ταξίδια με τρένο στην ΕΕ.

		Πλάτος καθίσματος 505 mm	Πλάτος καθίσματος 750 mm
	Μέγιστο βάρος χρήστη	300 kg	
Ⓐ	Συνολικό μήκος με υποπόδια	1065 mm	1145 mm
Ⓑ	Συνολικό πλάτος	705 mm	960 mm
	Συνολική μάζα	27,5 kg	29,5 kg
	Μάζα βαρύτερου τμήματος	20 kg	22 kg
	Στατική ευστάθεια σε κατηφόρα	25°	
	Στατική ευστάθεια σε ανηφόρα	23°	
	Στατική ευστάθεια πλαγίως	24°	
	Γωνία επιφάνειας καθίσματος	5°	6°
Ⓒ	Ωφέλιμο βάθος καθίσματος	450 mm	495 mm
Ⓓ	Ωφέλιμο πλάτος καθίσματος	518 mm	765 mm
Ⓔ	Ύψος επιφάνειας καθίσματος στο μπροστινό άκρο	350 mm	410 mm

		Πλάτος καθίσματος 505 mm	Πλάτος καθίσματος 750 mm
Ⓕ	Ύψος επιφάνειας καθίσματος στο πίσω άκρο	340 mm	400 mm
Ⓖ	Γωνία πλάτης	102°	104°
Ⓗ	Ύψος πλάτης καθίσματος	485 mm	520 mm
Ⓘ	Απόσταση από πατάκι υποποδίου έως κάθισμα	380 – 408 mm	333 – 420 mm
	Γωνία ποδιού προς επιφάνεια καθίσματος	136°	
	Διάμετρος στεφάνης χειρός	520 mm	
	Οριζόντια θέση άξονα	87 mm	90 mm
	Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής	855 mm	970 mm
	Πλάτος κατά την αποθήκευση	648 mm	875 mm
	Ύψος κατά την αποθήκευση	481 mm	415 mm
	Μήκος κατά την αποθήκευση	875 mm	975 mm
Ⓢ	Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	855 mm	920 mm
Ⓚ	Συνολικό ύψος	805 – 955 mm	

		Πλάτος καθίσματος 505 mm	Πλάτος καθίσματος 750 mm
	Πλάτος άξονα περιστροφής	1420 mm	1660 mm
	Μέγιστη γωνία κλίσης πέδησης	7°	

11.2 Μέγιστο βάρος αποσπώμενων μερών

Μέγιστο βάρος αποσπώμενων μερών	
Μέρος:	Μέγιστο βάρος:
Υποπόδιο με πατάκι	1,4 kg
Συμπαγής πίσω τροχός 600 mm (24") με στεφάνη κύλισης	2,4 kg
Μαξιλάρι καθίσματος	0,7 kg
Μαξιλάρι πλάτης	0,5 kg

11.3 Ελαστικά

Τύποι ελαστικών μπροστινών τροχών
Μαύρο συμπαγές ελαστικό, 125 x 35 mm (5" x 1 3/8"), μαύρη ζάντα
Μαύρο συμπαγές ελαστικό, 150 x 35 mm (6" x 1 3/8"), μαύρη ζάντα
Τύπος ελαστικού πίσω τροχών
Τυπικό μαύρο συμπαγές ελαστικό, 610 x 25 mm (24" x 1"), πέντε μαύρες ακτίνες από σύμμεικτο υλικό, μαύρη αλουμινένια στεφάνη κύλισης

11.4 Υλικά

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του αναπηρικού αμαξιδίου αποτελούνται από τα ακόλουθα υλικά:

Στύλοι πλαισίου	Αλουμίνιο
Στύλοι πλάτης	Αλουμίνιο
Σωλήνας άξονα	Αλουμίνιο
Κάλυμμα καθίσματος / Κάλυμμα πλάτης	PA / PE / PVC
Λαβές ώθησης	Χάλυβας / Αλουμίνιο / TPE
Προστατευτικό ρουχισμού	Πλαστικό
Πιρούνια ρόδας	Αλουμίνιο
Υποπόδια	Αλουμίνιο
Πέλμα	Πλαστικό
Φρένα στάθμευσης	Χάλυβας / Πλαστικό
Συμπαγή ελαστικά	Καουτσούκ
Στεφάνη κύλισης	Αλουμίνιο
Υποστηρίγματα / Προσαρτήματα	Χάλυβας / Αλουμίνιο
Βίδες και μπουλόνια	Χάλυβας



Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται διαθέτουν προστασία από τη διάβρωση. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά υλικά και εξαρτήματα που είναι συμβατά με τον κανονισμό REACH.



Αντικλεπτικά συστήματα και ανιχνευτές μετάλλων: Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο αναπηρικό αμαξίδιο ενδέχεται να ενεργοποιήσουν αντικλεπτικά συστήματα και ανιχνευτές μετάλλων.

11.5 Περιβαλλοντικές συνθήκες

	Αποθήκευση και μεταφορά	Λειτουργία
Θερμοκρασία	-20 °C έως 40 °C	-5 °C έως 40 °C
Σχετική υγρασία	20% έως 90% στους 30 °C, χωρίς συμπύκνωση	
Ατμοσφαιρική ή πίεση	800 hPa έως 1.060 hPa	



Έχετε υπόψη σας ότι όταν ένα αναπηρικό αμαξίδιο έχει αποθηκευτεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 *Συντήρηση, σελίδα 44* πριν από τη χρήση.

**EU Export:**

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Phone: (33) (0) 2 47 62 69 80
serviceclient_export@invacare.com
www.invacare.eu.com



Invacare France Operations SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
France



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1681257-A 27/11/2025



Yes, you can.