

POWER SERIES

TDX[®] SP2 ULM



Cadeira de rodas elétrica de tração central, altamente responsiva
com unidade avançada de assento ULM



| TDX® SP2 ULM

Ótimo Conforto e Performance.

A TDX® SP2 ULM (Ultra Low Maxx) é uma das nossas cadeiras de rodas elétricas de tração central com melhor desempenho.

A qualidade e a tecnologia estão são pontos centrais, combinadas com a nossa unidade de assento ULM e os comandos intuitivos LiNX para proporcionar sempre o melhor conforto e desempenho.



| TDX® SP2 ULM

É mais do que uma base de tração central.

A TDX® SP2 foi construída para ter um bom desempenho e levá-lo sem esforço onde quiser ir. Fácil de controlar e de manobrar para ajudá-lo a ter mais liberdade e independência.



Nova gama de carenagens

Escolha entre uma seleção de novas e entusiasmantes carenagens coloridos para um visual elegante.



Largura **650 mm**



Raio de viragem de **560 mm**



Excelente manobrabilidade

A tração central facilita a navegação em espaços apertados e proporciona-lhe um movimento mais controlado.



Suspensão patenteada SureStep®

Proporciona uma condução suave e confortável, mesmo em superfícies difíceis.



Maior estabilidade e segurança

Concebida para garantir que as seis rodas permanecem firmes no chão com a função de Stability Lock.

| TDX® SP2 ULM

Novas cores. Durabilidade extra.

Dê um toque de frescura e estilo com uma nova cor de carenagem. A durabilidade extra da mesma, ajuda-o a proteger e a suportar os desafios do dia a dia.



Preto Obsidiano

Vermelho Rubi

Púrpura

Azul

Azul Ártico

| TDX® SP2 ULM

Concebida para a excelência clínica.


O assento ULM foi concebido pelos nossos especialistas clínicos para proporcionar ótimo conforto e apoio, com um ajuste personalizado, para permitir uma maior independência e acessibilidade.

Construído com ajustes integrados, juntamente com o sistema inteligente Ultra Rail, garante que o ULM pode ser adaptado para fornecer a correta solução combinada de assento.



Extended Shear Reduction (ESR)

Concebida com base nos pontos de articulação naturais do corpo, permite uma gama otimizada de posicionamento elétrico, para garantir que na posição sentada permaneça apoiado e confortável. O mecanismo ajuda a minimizar as forças de cisalhamento e a gerir a redistribuição da pressão.

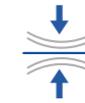

Posicionamento à medida

Altamente modular e ajustável para se adaptar às necessidades que mudam com o tempo.



Apoios de pernas central elétrico LNx

Ajustam-se tanto em ângulo como em comprimento, funcionando com a reclinção elétrica para ajudar a reduzir as forças de cisalhamento.



Soluções premiadas Matrix®

Opções de assentos Matrix personalizados para garantir sempre um ótimo ajuste.



| TDX® SP2 ULM

matrx®
SCIENCE OF SEATING

Trabalhando em combinação com a unidade de assento ULM altamente ajustável, a premiada gama de posicionamento **Matrx**® proporciona-lhe um ajuste mais favorável, com maior proteção, para garantir o máximo conforto.



Apoios de cabeça

A nossa gama de apoios de cabeça Matrx Elan, altamente ajustável, foi concebida para permitir um posicionamento eficaz. A espuma moldada de dupla densidade proporciona imersão, conforto e proteção.



Cintos de posicionamento Bodypoint

Para uma função, mobilidade e estabilidade ótimas, oferecemos uma variedade de cintos peitorais e de posicionamento. Isto ajuda a garantir que a pélvis e a parte superior do corpo estão bem posicionadas, para um maior controlo e uma melhor funcionalidade.



Suportes laterais de tronco e anca

Uma gama de suportes de várias formas e tamanhos. Suportes ajustáveis de extração rápida para um melhor posicionamento e fáceis de remover para transferências.



Opções de encosto

Está disponível uma gama de opções de encosto, incluindo a nossa série Matrx, para o máximo apoio postural, alívio da pressão e controlo excepcional do microclima. Inclui suporte de contorno incorporado para maior estabilidade.



Almofadas de assento

Escolha entre uma seleção de almofadas de assento que promovem o posicionamento e a proteção da pele. A nossa Matrx Libra foi concebida com um saco Flo-tech de camada dupla para uma melhor gestão das forças de cisalhamento e pode ser combinada com opções de posicionamento adicionais.

| TDX® SP2 ULM

Com tecnologia avançada **LiNX**®

A tecnologia **LiNX**® ajuda a proporcionar uma experiência de condução personalizada e confiável. A tecnologia inovadora aprende os hábitos e as preferências ao longo do tempo, tornando-a num sistema super intuitivo.



| TDX® SP2 ULM

Descubra mais.



Novo suporte de comando Resolve

- Gama excepcional de posições de comando para um conforto otimizado.
- Ajustável em tensão.
- Conforto e controlo otimizados.



Ecrã tátil de 3.5"

Impressionante ecrã tátil a cores de 3,5" com joystick, velocímetro e conta-quilómetros.



Comandos especiais

Incluindo comandos compactos, de cabeça e com sensores de proximidade.



Bluetooth® incorporado

Permite a conectividade com dispositivos e comandos externos.



Opções de input

Uma grande variedade de opções input de comandos, permite uma configuração personalizada para um controlo máximo e a garantia de que a cadeira elétrica reagirá de forma consistente.



| TDX® SP2 ULM

Dados técnicos.

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso sítio Web www.invacare.pt.

Novas cores



Preto Obsidiano Vermelho Rubi Púrpura Azul Azul Ártico



Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do assento	Altura do encosto	Altura do apoio de braços	Apoio de pés	Ângulo do assento
405 - 610 mm	405 - 580 mm	420 - 544 mm	355 - 685 mm	230 - 405 mm	290 - 465 mm	-10° - 50°
Ângulo do encosto	Altura total	Comprimento total incluindo apoios de pés	Comprimento total sem apoios de pés	Largura da base tração	Peso máximo do utilizador	Capacidade da bateria
60° - 168°	1080 - 1210 mm	1290 mm	980 mm	650 mm	136 kg	73 Ah
Diâmetro de viragem	Altura máxima de obstáculos transponíveis	Máxima inclinação	Velocidade	Autonomia	Peso total	
1120 mm	75 mm	9° / 15,8%	Até 12 km/h	Até 41 km	183 kg	

| TDX® SP2 ULM

Partilhe as suas ideias e ajude a moldar o futuro das cadeiras elétricas.

Convidamo-lo/a a **partilhar a sua opinião**. As suas perspetivas ajudar-nos-ão a servir melhor os utilizadores de cadeiras elétricas.

Digitalize e preencha o formulário.



Obrigado por nos deixar participar na sua viagem.

Equipa Invacare Power Series



Partilhe a sua opinião

SUBSCRIBE



A minha cadeira permite-me viver uma vida independente e sair à rua todos os dias.

Ian Mackay
Embaixador da Invacare



P O W E R S E R I E S

TDX SP2

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel: +41 61 487 70 70

hqeuropa@invacare.com

www.invacare.eu.com

©2024 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados.
Todas as informações citadas são consideradas corretas no
momento da impressão. A Invacare reserva-se o direito de alterar
as especificações do produto sem consulta prévia. PT - TDX SP2
ULM - 11/2024.

