




Yes, you can.®


## Invacare® **Matelas et Surmatelas**

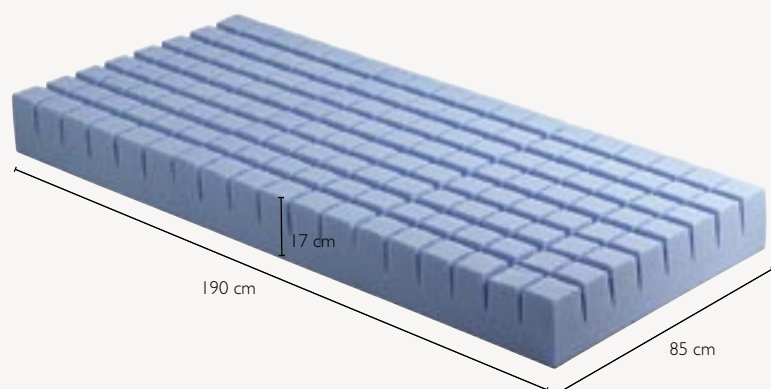

### ➤ **Invacare® Atmos L880**

Matelas gaufrier monodensité aidant à réduire le risque d'escarres chez un patient longtemps alité. Il permet une meilleure circulation de l'air pour limiter la transpiration, et diminue l'effet de cisaillement lors des mouvements.

- Gaufrier monodensité
- 3 parties identiques séparables
- Livré avec alèse en dermalon

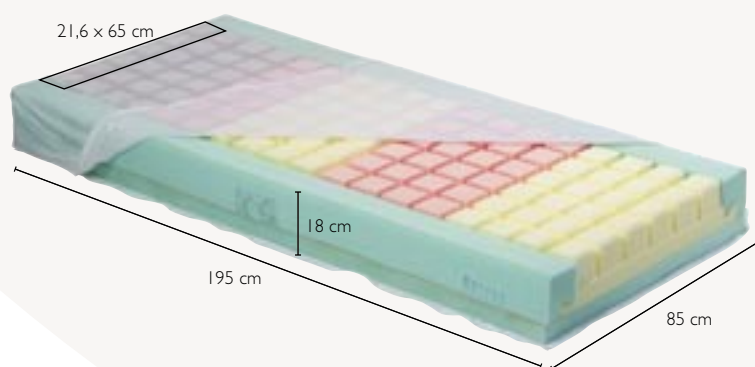


### ➤ **Invacare® Respos L883**

Combinant 9 éléments de mousse de dureté différentes, ce matelas gaufrier multidensité aide à réduire le risque d'escarres. Ainsi, la mousse souple sera placée dans la zone à haut risque, pendant que la mousse plus dure sera placée dans les zones à risque réduit.

- 9 éléments de mousses à dureté différentes identifiables par des couleurs
- Éléments interchangeables attachés par Velcro
- Livré avec housse de protection

### ➤ **Invacare® Alèse L881**

Cette alèse haute élasticité, imperméable, en dermalon, protégera les matelas gaufriers de vos patients.

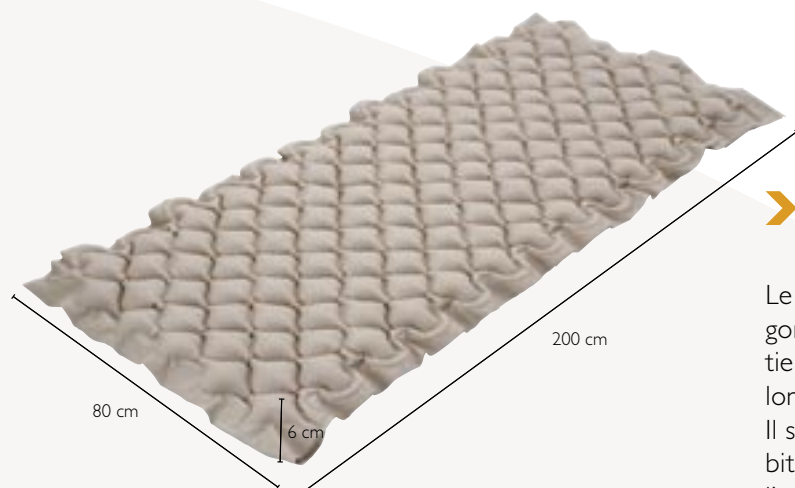


➤ Invacare® **Liber (L803)**   
**Eskal (L839)** 

Le surmatelas Eskal constitué de deux circuits d'air gonflés alternativement évitera qu'une même partie du corps de votre patient ne soit soumise trop longtemps à des pressions trop importantes. Il s'accompagne du compresseur Liber, dont le débit de l'air est réglable en fonction des besoins de l'utilisateur.

- Mouvement du matelas favorisant la circulation de l'air
- Compresseur très silencieux
- Débit de l'air réglable

**Pièces détachées**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ❶ Interrupteur                   | L803-MA04A |
| ❷ Bouton de réglage              | L803-MA05A |
| ● Filtre à air                   | L803-MA01A |
| ● Fusible                        | L803-MA02A |
| ● Pompe à air                    | L803-MA03A |
| ● Platine électronique           | L803-MA06A |
| ● Distributeur d'air avec moteur | L803-MA07A |

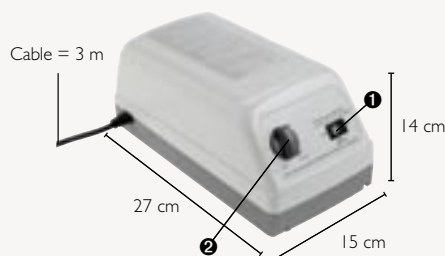

**Caractéristiques techniques**

	<b>L839 / L803</b>	<b>L880</b>	<b>L883</b>	<b>L881</b>
Poids (kg)	2/2	10	10	0,4
Poids max. utilisateur (kg)	100	100	100	
Couleur	Beige			
Code ACL	L839 : 7021152 L803 : 7021123	7021100	7372868	7021117
Garantie (an)				