



matrx[®]MAC



ENCOSTO COM CONTORNO MULTI-AJUSTÁVEL

Personalização fácil





matrx®MAC

Design baseado no conhecimento clínico

Apresentamos a nossa novidade de posicionamento, o Matrx® MAC, que é o novo encosto com contorno lateral ajustável e com uma opção com almofada HUG.

AJUSTE À MEDIDA

Completamente configurável para todas as estruturas corporais e posturais, sendo ajustável ao longo do tempo.

O Matrx MAC é a melhor forma de conseguir um suporte, posicionamento e conforto de forma personalizada.



PRECISÃO

Cada especificação desenvolvida com base no conhecimento clínico, tem como objetivo a eficiência, a qualidade e um ajuste preciso. Combine os diferentes contornos laterais para um suporte ainda mais adaptado.



CONFORTO

A estrutura com contorno e a opção de almofada HUG, proporcionam maior imersão e envolvimento, aumentando o conforto geral.



SUPORTE

Baseado na forma anatômica do encosto Elite E2, o Matrx MAC promove uma boa postura e um alinhamento melhorado do tronco.

m Modular para um Ajuste à Medida

O Matrx® MAC é uma solução modular, especialmente adequada para cadeiras de rodas com basculação e reclinção. Com contornos laterais compatíveis bilateralmente, que podem ser combinados para proporcionar um apoio de tronco personalizado, para pessoas com necessidades posturais mais complexas.

PERSONALIZE

3 profundidades de contorno e possibilidade de contorno assimétrico




m Ajuda a corrigir escolioses leves


O colapso postural pode impedir o funcionamento dos órgãos internos. O Matrx MAC promove um alinhamento natural do tronco e da postura.




LARGURA
E ALTURA
AJUSTÁVEIS

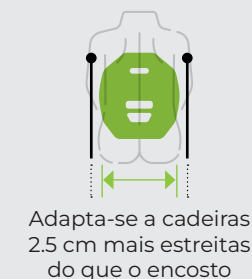

Adapta-se a cadeiras 2,5 cm mais estreitas do que o encosto

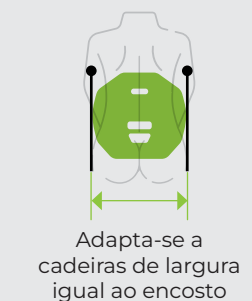

Adapta-se a cadeiras de largura igual ao encosto

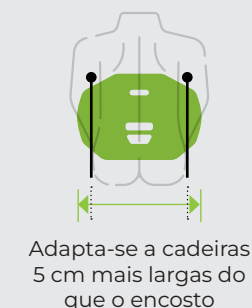

Adapta-se a cadeiras 5 cm mais largas do que o encosto

Escolha a Almofada Matrix HUG para um Conforto Superior

Almofada HUG como opção, com Stamina Fibre® suave e confortável para máxima imersão e envolvimento.

- Controlo do Microclima
- Hipoalergénico
- Com possibilidade de lavar e secar na máquina
- Mantém a sua forma

Recomendado para assimetrias posturais leves.


matrx[®]HUG

Combine a opção Matrix SHAPE com a almofada HUG, para otimizar os pontos de contacto com o encosto.

- As múltiplas posições dos blocos de espuma, permitem uma configuração à medida
- Utilize até 25 blocos de espuma fornecidos
- Fixação precisa da espuma - mantida no lugar em todos os momentos

Recomendado para assimetrias posturais moderadas.

matrx[®]SHAPE

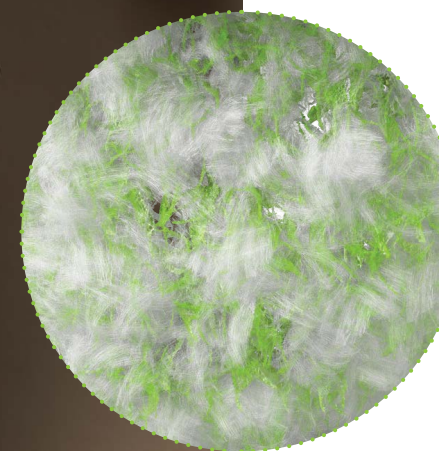

Stamina Fibre®



Espuma de dupla camada

Camadas de espuma Super macia e de HR firme, para conforto e suporte



HUG

Stamina Fibre® suave e adaptável para máxima imersão e envolvimento

m Veja em Pormenor

O Matrx® MAC tem uma estrutura rígida com contorno ergonómico, baseada no Matrx® Elite E2, com apoio escapular adicional para basculação e reclinção.

INTERFACE DE MONTAGEM PARA APOIO DE CABEÇA

Inclui interface heavy-duty

ESTRUTURA CENTRAL

Espuma de dupla camada ou HUG com Stamina Fibre® (não ilustrado)

FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO

Facilita a montagem e alinhamento dos hardwares e dos contornos laterais durante a instalação



MISTURAR & COMBINAR

Os contornos laterais são destacáveis, pelo que podem ser misturados e combinados, consoante as necessidades específicas

AJUSTE EM LARGURA

Os contornos compatíveis bilateralmente, são multi-ajustáveis de forma independente, permitindo um ajuste em largura de 3 cm

AJUSTE EM PROFUNDIDADE

3 perfis diferentes para 3 profundidades de encosto

AJUSTE EM ALTURA

Os contornos laterais podem ser regulados em altura de forma independente, enquanto o utilizador permanece sentado



Opções de montagem e de hardwares de fixação



EASYSET

Standard em todos os encostos de 46 - 56 cm de altura. Com extração rápida para uma fácil remoção do encosto.



HEAVY-DUTY EASY SET

Recomendado para utilizadores com tónus elevado ou para utilização intensiva.



SPLIT

Mais facilidade e versatilidade na montagem (tamanho reduzido e separado em duas peças - ideal para tubos de encosto com parafusos proeminentes). Permite a extração fácil do encosto



FIXO

Montagem permanente que requer ferramentas para o encosto ser removido. (recomendado para cadeiras manuais ou elétricas com sistema de basculação/ reclinção). Adequado a encostos com altura de 46 a 56cm.

Tamanhos do encontro

		LARGURA				
		41cm	43cm	46cm	48cm	51cm
ALTURA	Para cadeiras com larg	39-46cm	41-48cm	43-51cm	46-53cm	48-56cm
	41cm					
	46cm					
	51cm					
	56cm					

Especificações técnicas

- Ajuste em ângulo40°
- Ajuste em profundidade10cm
- Contorno lateral.....9, 15, 23cm
- Ajuste em largura do contorno3cm
- Ajuste em altura do contorno20cm
- Lavagem da capa60°C
- Peso máximo do utilizador136kg
- Garantia2 anos



Matrix MAC em destaque com o apoio de cabeça Matrix Loxx na cadeira de rodas Invacare Rea Azalea



O encosto Matrix® MAC quando utilizado durante o transporte de um utilizador, deve estar equipado com um apoio de cabeça e só pode ser utilizado em conjunto com cadeiras de rodas que cumpram os requisitos de desempenho da RESNA WC19 ou da ISO 7176-19



[invacare.eu.com](https://www.invacare.eu.com)

© 2025 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação citada é credível ser correta no momento da impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações do produto, sem consulta prévia.
Encosto Matrix MAC - PT - 07/25